



Focuskin

BRUGERVEJLEDNING

Dansk

mesoskinline®

Dansk brugervejledning · mesoskinline

Indhold

3 ·	Introduktion
4-5 ·	Focuskins opbygning og specifikationer
6-7 ·	Installation af Focuskin
8 ·	Kom godt i gang: startskærmen
9 ·	Produktregistrering og anbefalinger
10 ·	Fotografering og kunderegistrering
11-12 ·	PIE-partner: produkter, logo og franchiser
13-15 ·	Fotografering, fugtmåling og analyseområder
16 ·	Visning af historik
17 ·	Analyseresultater: samlet oversigt
18 ·	Deling af analyseresultater
19-20 ·	Detaljeret resultatvisning
21 ·	Hudtype
22 ·	Porer, rynker, elasticitet og pigmentering
23 ·	UV-pigmentering, hudtone, rødme og glans
24 ·	Talg, porfyrin, fugt, personlig farvetype og detaljevisning
25 ·	Skydevisning, overvejring og billedskift
26 ·	3D-visning af analyseområder
27 ·	Sammenlignende analyse
28-33 ·	Opsætning af konsultations-pc
34-35 ·	Systemindstillinger
36 ·	Tak



Focuskin



Introduktion


Kære bruger

Tak, fordi du har valgt vores Focuskin-hudanalysator.

Denne vejledning skal hjælpe dig med at bruge produktet effektivt. Læs de detaljerede instruktioner om produktets vigtigste funktioner og anvendelse, og oplev en sundere og smukkere hud med Focuskin.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os. Vi håber, at Focuskin bliver starten på din vej mod en sund hud med udstråling.

Tak.

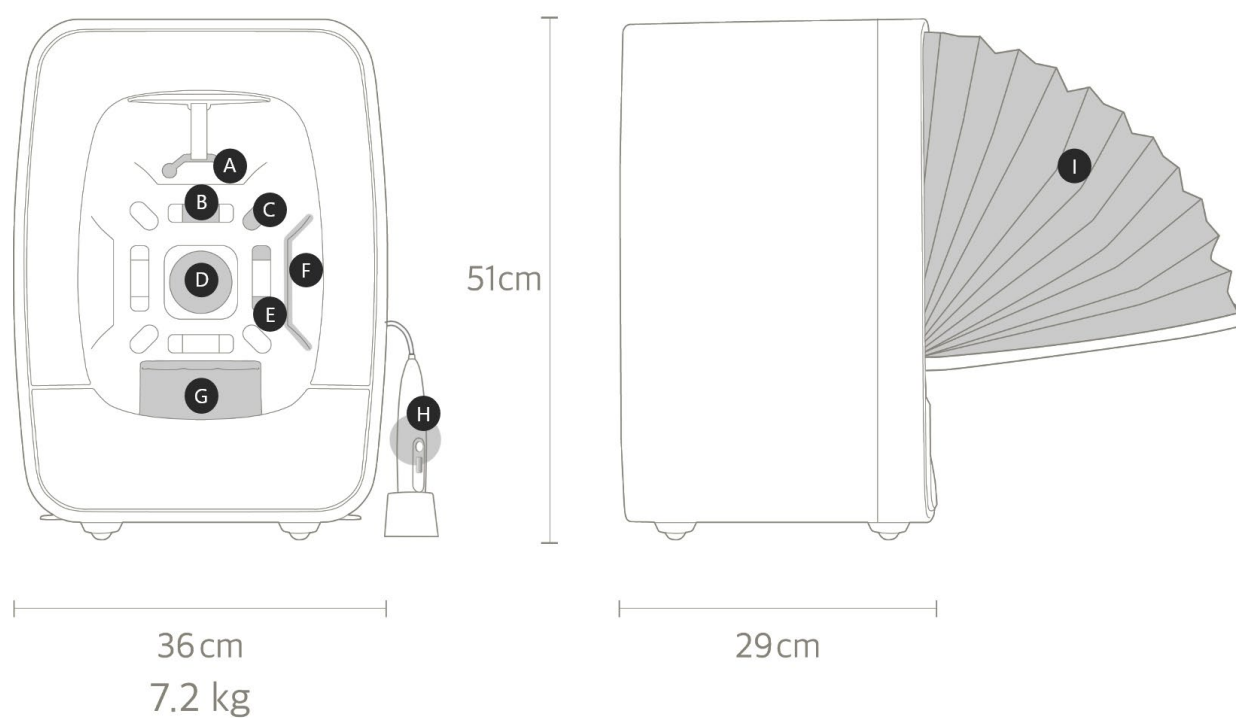

Focuskins opbygning

- A · Pandestøtte
- B · Krydspolariseret lys
- C · UV-lys
- D · Digitalkamera
- E · Parallelpolariseret lys
- F · Normalt lys
- G · Hagestøtte
- H · Fugtmåler
- I · Sammenfoldelig mørklægningshætte

Focuskins specifikationer

HARDWARE

Kamera: Digitalkamera, 20 megapixel.

Lys: Sunlike LED og 385 UV LED. Normalt lys, krydspolariseret lys, parallelpolariseret lys og UV-lys.

Kameraopløsning: 2592 × 2888 px.

Vægt og mål: 7,2 kg / 36 cm (B) × 29 cm (D) × 51 cm (H).

SOFTWARE

Analysepunkter: Porer, elasticitet, hudtone, pigmentering, UV-pigmentering, rødme, rynker, glans, talg, porfyrin, hudtype og fugt.

Sprog: Koreansk, engelsk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, japansk, russisk, vietnamesisk, spansk, tysk, fransk, portugisisk (Brasilien), italiensk, ungarsk, arabisk, thai, indonesisk, tyrkisk, mongolsk, bulgarsk, mauritisk, hebraisk og serbisk.

Skærmopløsning: Understøtter alle skærmopløsninger ovenfor; 16:9-bredformatskærme anbefales. Originalen angiver ingen tydelig minimumsopløsning.


Operativsystem: Windows® 7/8/10/11 (64-bit).

Medfølgende dele: Strømkabel, USB-kabel, fugtmåler og holder, kappe og magnetisk holder, hårbånd samt USB-enhed.




Installation af Focuskin

Følg installationsforløbet i skærbillederne 1-8. De danske knaptekster i denne vejledning er illustrative; knapperne i det installerede program kan stå på originalsproget.

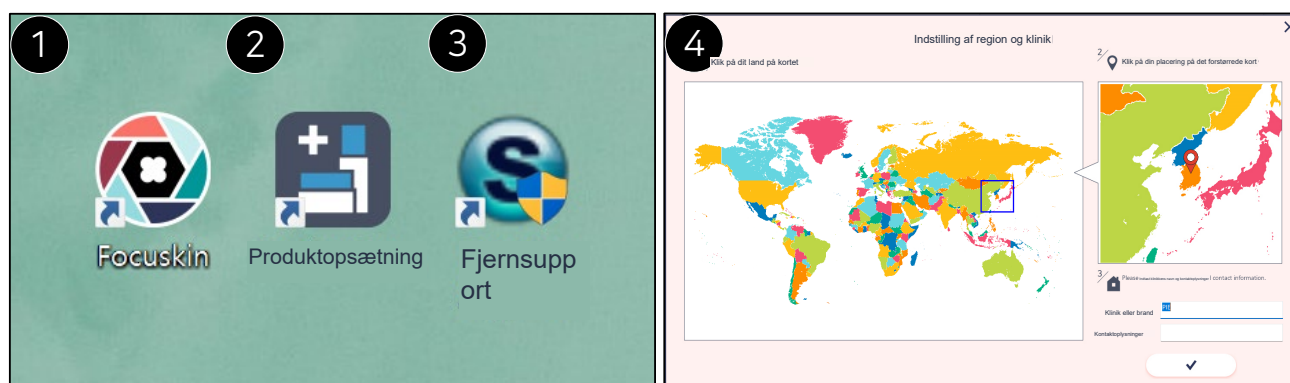

Installation af Focuskin

- 1 · Dette er ikonet, der starter Focuskin.
- 2 · I vinduet til produktanbefalinger kan du registrere, redigere og slette produkter.
- 3 · Når installationen er afsluttet, installeres fjernsupportprogrammet automatisk. Ved senere behov for support skal du åbne ikonet, skrive 'pie' i serverfeltet og klikke på logiknappen.
- 4 · Her indstilles region og klinik/butik. Vælg det sted, hvor din Focuskin-enhed anvendes, da hudanalysen baseres på gennemsnitsdata fra den valgte region.

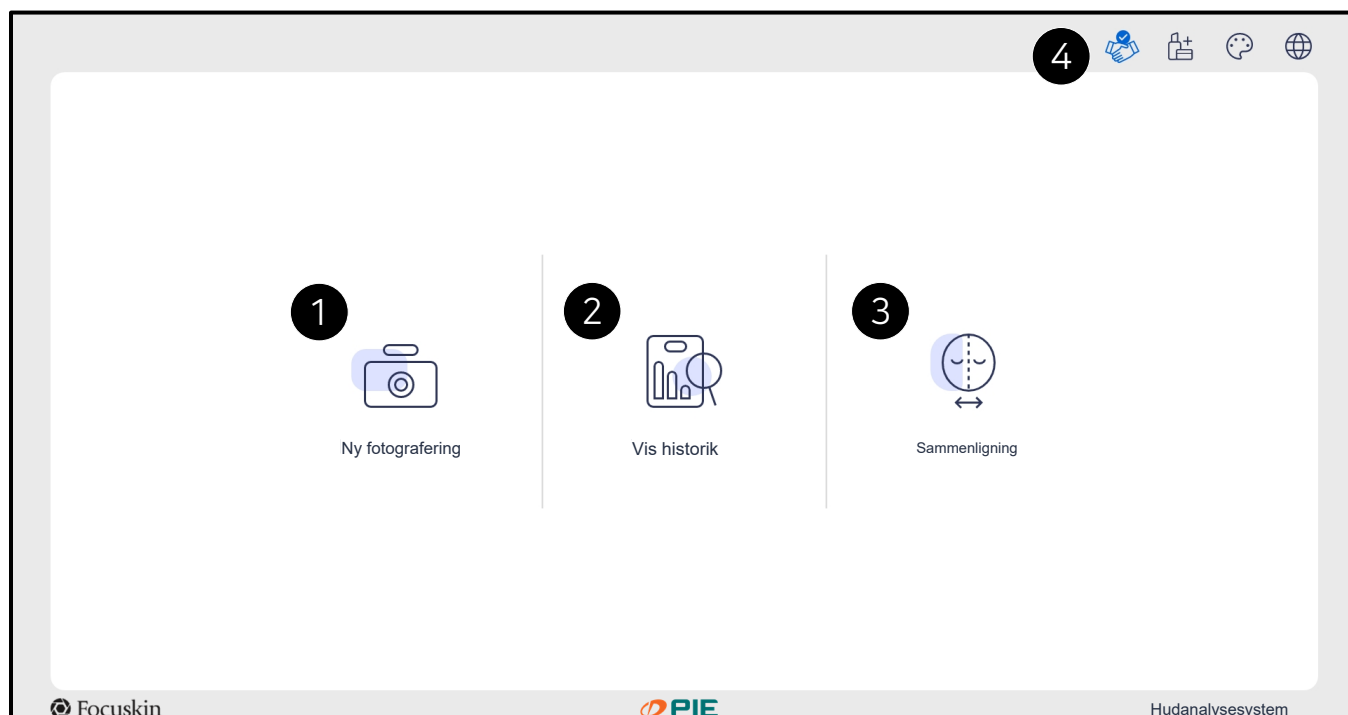


Kom godt i gang: startskærmen

1 · Her kan du registrere kunder og foretage fotografering. Navn, fødselsdato og køn er obligatoriske felter. Tryk på knappen + nederst for eventuelt at tilføje flere oplysninger.

2 · Tryk på 'View History' for at hente tidligere registrerede kunder og deres fotograferinger. I historikvisningen kan du analysere tidligere billeder forfra samt fra venstre og højre side.


3 · Du kan sammenligne og analysere billeder fra den seneste analysedato og tidligere analysedatoer. Funktionerne omfatter skydevisning, overlejring og billedskift.

4 · Ikonerne er fra venstre mod højre: registrer/rediger/slet produkter, skift tema og skift sprog.

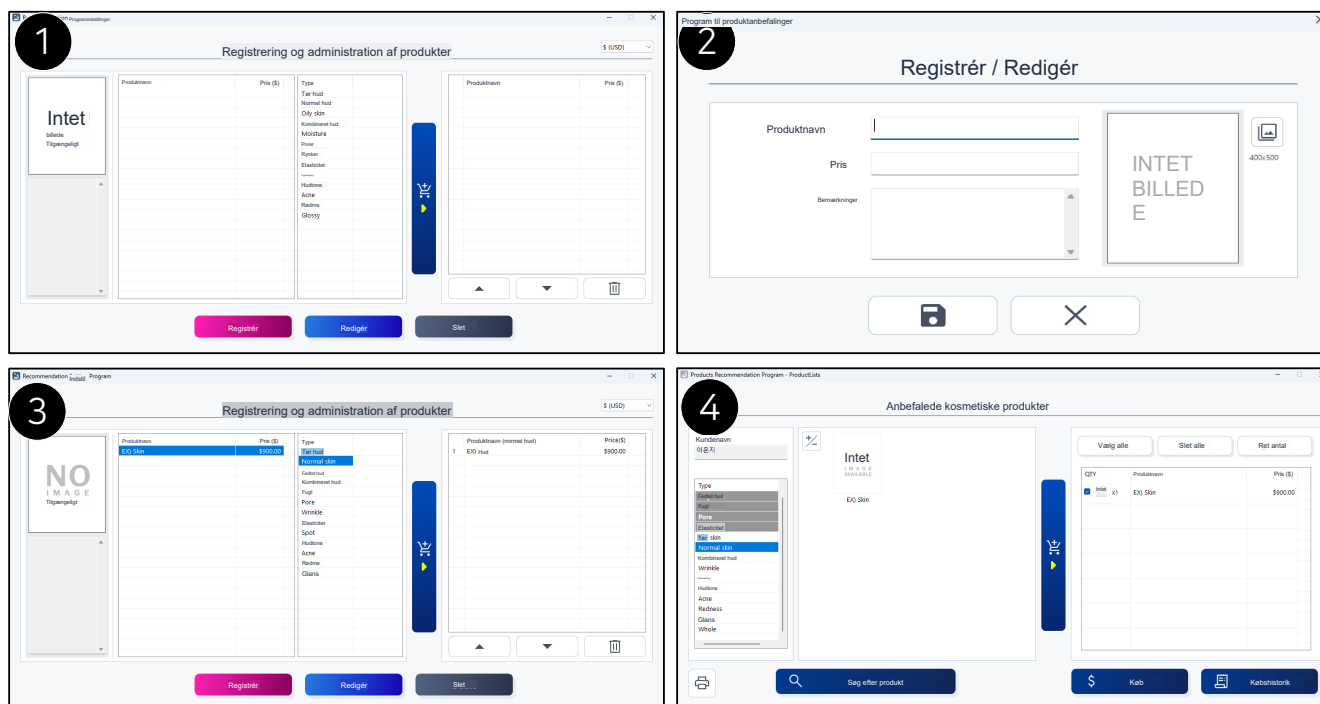

Produktregistrering og anbefalinger

- 1 · Klik på ikonet til produktregistrering for at åbne vinduet, hvor du kan registrere, redigere og slette produkter.
- 2 · Indtast produkt navn, pris og beskrivelse (memo). Klik derefter på fotoikonet '400x400' øverst til højre for at tilføje produktbilledet. Den anbefalede billedstørrelse er 400 × 400 pixels.
- 3 · Når produktet er registreret, skal det tilknyttes en eksisterende kategori. Kategorier anbefales automatisk til kunderne på baggrund af deres analyse. Vælg det registrerede produkt og den relevante kategori, og tryk på 'Add to the right' for at føje produktet til kategorien. Kategorierne kan ikke ændres.
- 4 · Kontrollér i vinduet med analyseresultater, at produktet er placeret i den ønskede kategori. Hvis produktet skal ændres eller slettes, skal du klikke på produktregistreringsikonet igen og foretage ændringen.

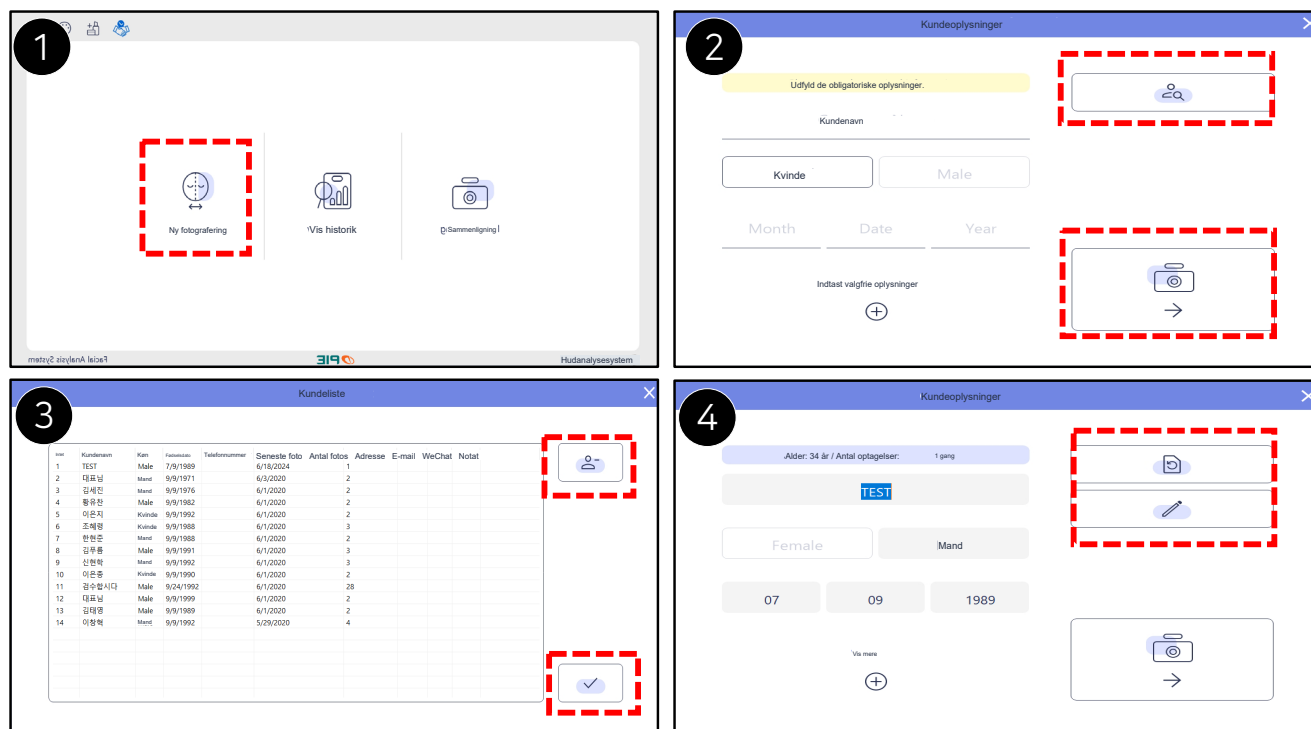


Fotografering: kunderegistrering

1 · Dette er Focuskins startside. Tryk på 'New Shoot' til venstre.

2 · For kunder uden tidligere fotograferinger skal du indtaste de obligatoriske oplysninger og trykke på 'Start Shoot' nederst til højre. For kunder, der allerede er fotograferet, skal du klikke på 'Customer List' øverst til højre. Med knappen + nederst kan du tilføje valgfrie kundeoplysninger.

3 · I kundelisten vælger du den kunde, der skal fotograferes, og trykker på knappen med fluebenet nederst til højre. Øverst til højre findes knappen til sletning af kunder. Vælg den kunde, du vil slette, og indtast adgangskoden 1234. Slettede kunder kan ikke gendannes. Vælg derfor omhyggeligt.

4 · Når en kunde er valgt i kundelisten, kan oplysningerne ændres med knappen øverst til højre, hvorefter listen kan genindlæses.

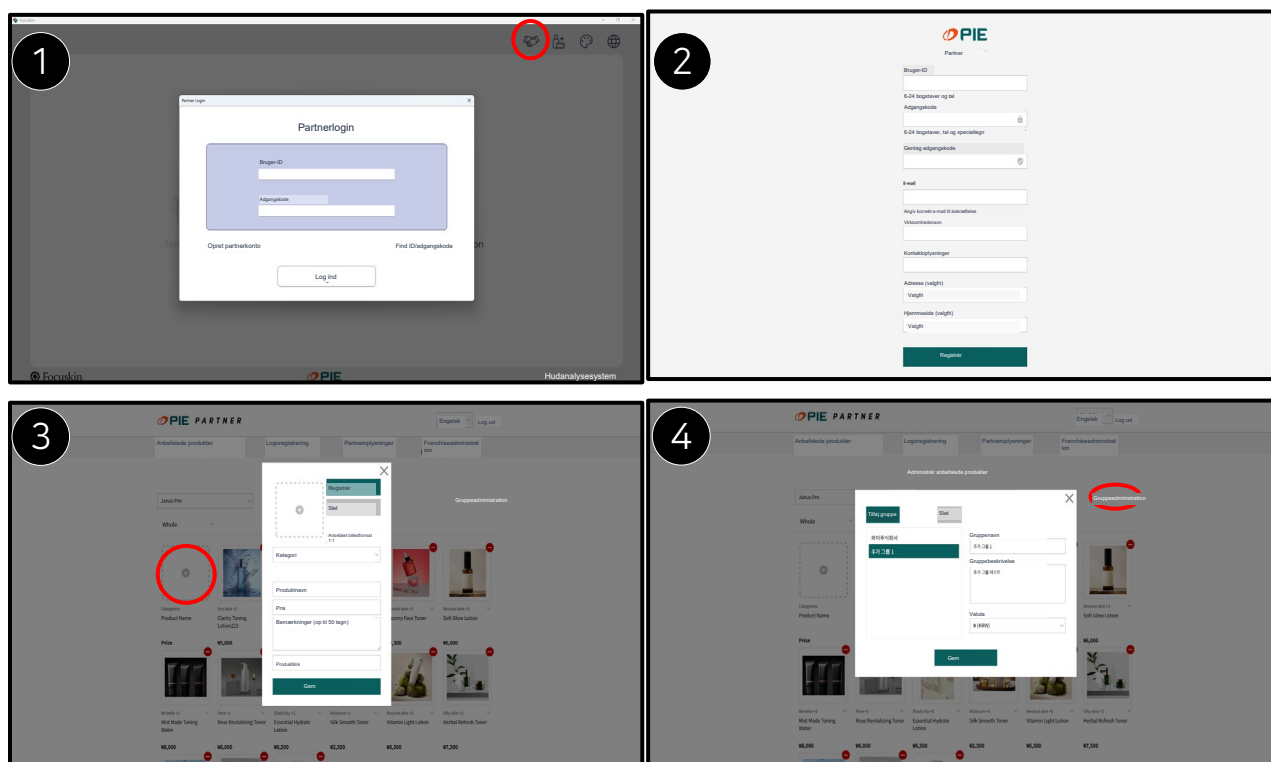


Kom godt i gang: PIE-partner

1 · Partnerindstillingerne giver adgang til bl.a. online produktopsætning, ændring af virksomhedslogo og administration af franchiser. Produkter, som registreres i selve Focuskin-programmet, kan kun ses i programmet. Produkter registreret via partnerindstillingerne kan købes direkte via et link. Du kan desuden vise relevante produkter ved at oprette grupper til forskellige situationer, årstider mv. Klik på partnerikonet for at åbne partnerlogin, og klik på 'Partner Signup' nederst til venstre.

2 · På PIE-partnerhjemmesiden klikker du på tilmeldingsknappen. Som led i tilmeldingen skal e-mailadressen bekræftes. Efter bekræftelsen klikker du på tilmeldingsknappen.

3 · Administration af anbefalede produkter - produktregistrering: Klik på produktregistreringsknappen midt i venstre side. Angiv billede, kategori, produkt navn, pris, bemærkninger (produktbeskrivelse) og produktlink. Klik på gem, når oplysningerne er udfyldt. Produktbilleder skal fylde mindre end 2 MB og være mindre end 800 × 800 pixels.

4 · Administration af anbefalede produkter - grupper: Klik på gruppeadministration øverst til højre for at tilføje en gruppe. Registrer produkter i gruppen; de vises, når gruppen vælges. Du kan fx oprette grupper med sæsonprodukter, tilbudsprodukter eller lagervarer.

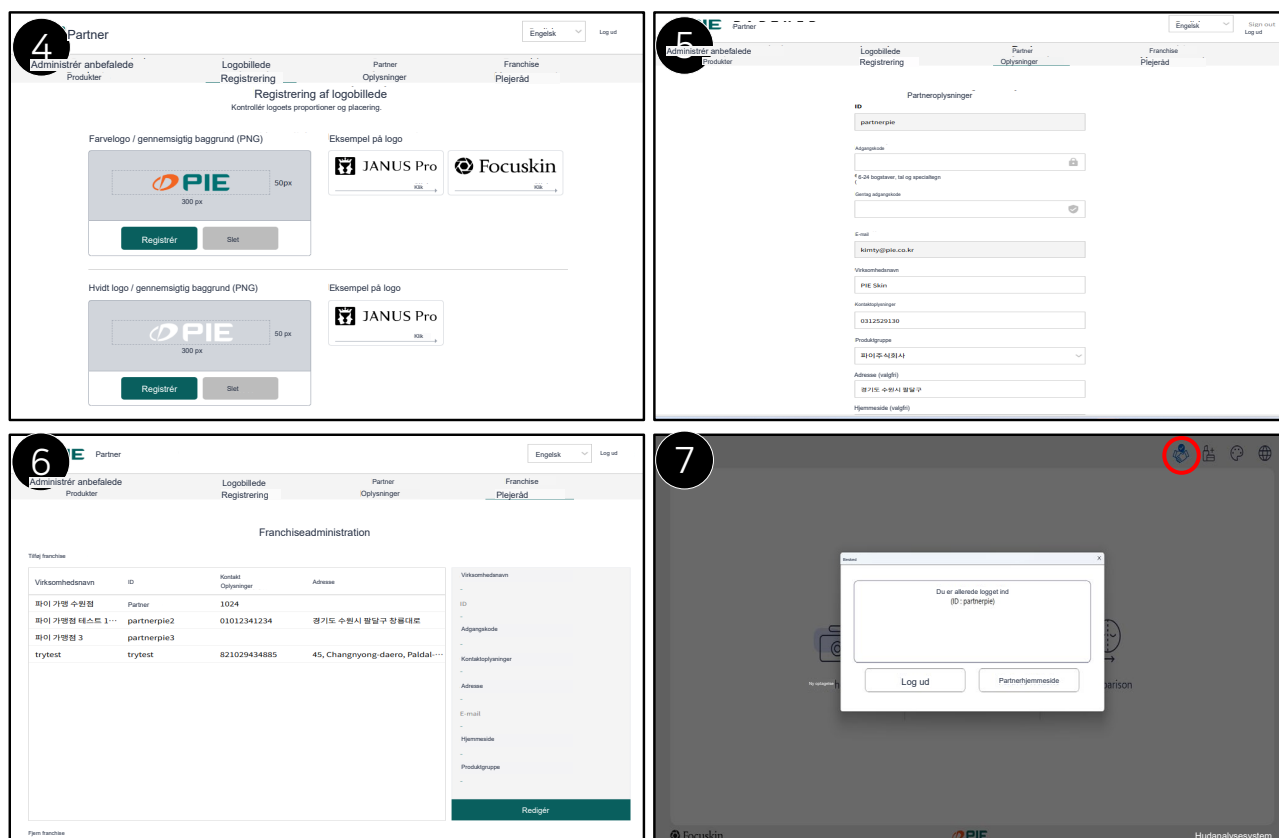


PIE-partner: logo og franchiser

4 · Registrering af logo: Du kan registrere både et farvelogo og et hvidt logo som PNG med gennemsigtig baggrund i størrelsen 300 × 50 pixels. Klik på knappen med logoeksemplet nederst for at se placeringen af det registrerede logo.

5 · Partneroplysninger: Du kan ændre virksomhedens oplysninger. Det eksisterende ID og den registrerede e-mailadresse kan ikke ændres, men adgangskode, virksomhedsnavn, telefonnummer, adresse og webadresse kan redigeres.


6 · Franchiseadministration: Har du en franchise, kan den registreres ved at klikke på 'Add Franchise' til venstre. Franchiser kan logge ind på Focuskins partnerportal med det ID og den adgangskode, der er oprettet i franchiseadministrationen. Du kan også tildele produktgrupper til hver franchise og vise produkterne fra disse grupper.

7 · Når du er registreret som PIE-partner, ændres ikonet. Klik på det for at se det aktuelle login-ID og gå til partnerhjemmesiden.

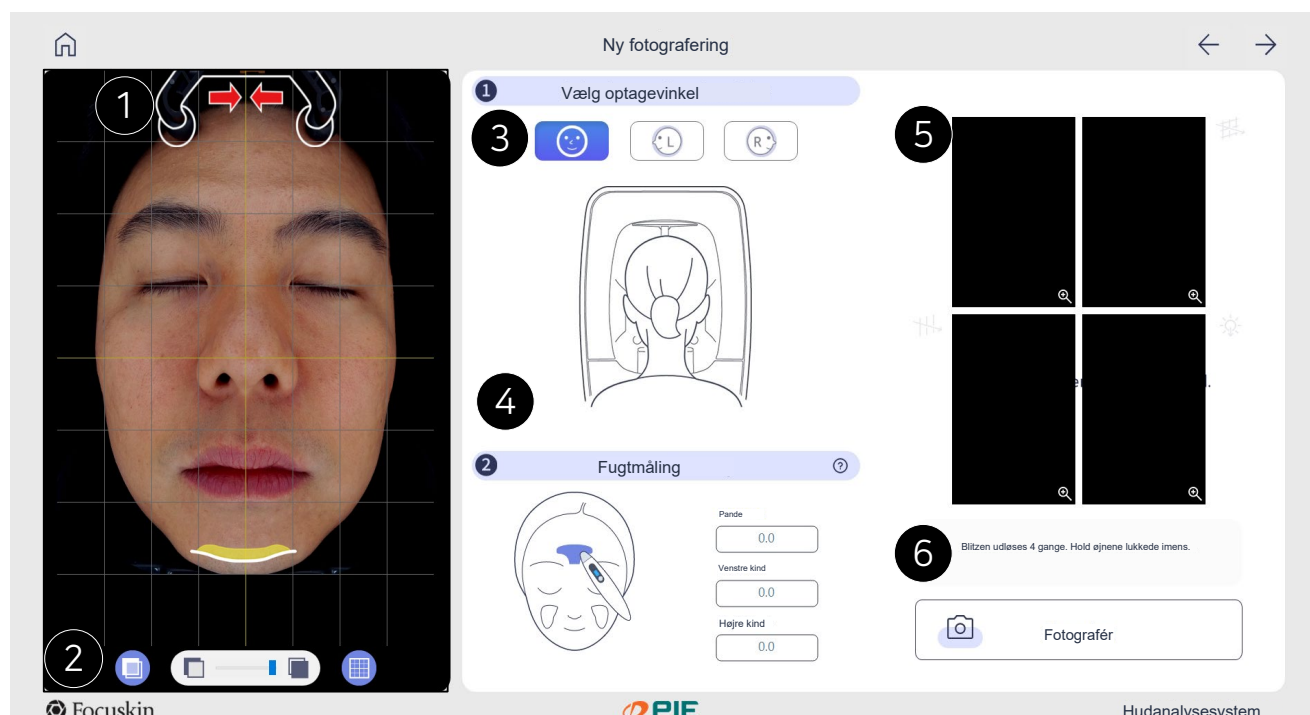

Fotografering med Focuskin

- 1 · Billedet viser pande- og hagestøttens retning under fotografering. Ved fotografering forfra vender begge støtter fremad. Pandestøttens længde justeres manuelt efter kundens ansigtsstørrelse og -længde.
- 2 · Billeder fra tidligere sessioner kan lægges oven på kamerabilledet. Juster gennemsigtigheden, så kunden lettere kan placeres i samme position som før. Brug også knappen til hjælpelinjer for at centrere ansigtet. Ved første fotografering skal næsen placeres lige frem mod kameraet uden at hælde til nogen af siderne.
- 3 · Vælg fotografering forfra, fra venstre eller fra højre. Det er ikke nødvendigt at fotografere fra alle tre vinkler; du kan vælge kun front- eller sidebilleder. Ved omfotografering vælger du ikonet for den relevante vinkel og trykker på knappen til at starte fotograferingen.
- 4 · Mål fugt i denne rækkefølge: pande, højre kind, venstre kind. Hold fugtmåleren, tryk på måleknappen, og vent på to lydsignaler. Placér derefter forsigtigt måleren midt på panden. Tryk igen på måleknappen efter målingen, vent på to lydsignaler, og placér måleren på kinden. Resultaterne gemmes automatisk. For at måle igen klikker du på den relevante måleværdi og gentager forløbet.
- 5 · De fire billeder vises fra øverst til venstre i denne rækkefølge: normalt lys, krydspolariseret lys, parallelpolariseret lys og UV-lys. Klik for at se et billede i fuld skærm.
- 6 · Kontrollér, at hårbånd og kappe sidder korrekt. Sænk hættten, og start fotograferingen. Den tager i alt 8 sekunder og bruger fire lyskilder. Løft derefter hættten igen, og træk dig langsomt ud efter stemmevejledningen. Pas på ikke at støde hovedet mod hættten.

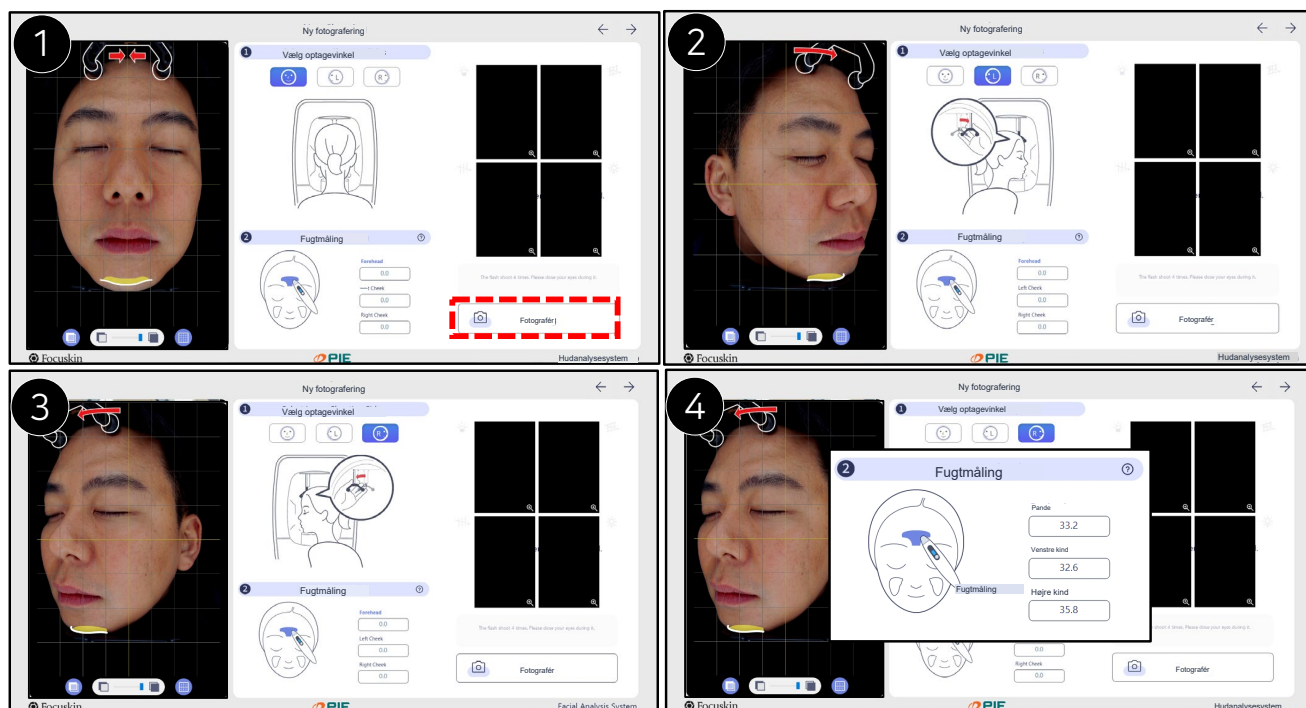


Fotografering: placering og fugtmåling

1 · Ved frontbilleder tilpasses pandestøttens længde til kundens hovedstørrelse. Sænk den ca. 1-2 hak for mænd og ca. 3-4 hak for kvinder. Placér pandestøtten ved det punkt, hvor pandens krumning begynder, omtrent ved en tredjedel af panden. Når alt er kontrolleret, sænkes hætten, og fotograferingen startes.

2 · Fortsæt med venstre side efter frontbilledet. Drej pandestøtten til den side, der vises i videoen, og placér hagestøtten i den viste rille. Kontrollér placeringen, sænk hætten, og fotografér. Hvis du kun vil tage frontbilledet, klikker du på 'Next' øverst til højre for at indstille analyseområdet for frontbilledet.

3 · Fotografér derefter højre side på samme måde. Hvis der er behov for et nyt billede, vælger du den relevante vinkel og gentager fotograferingen.

4 · Afslut med fugtmålingen. Tryk én gang på fugtmålerens knap, og slip den igen. Efter to lydsignaler måles først panden og derefter højre og venstre side på samme måde. Klik på 'Next' øverst til højre for at fortsætte til analysen. Analyse af venstre og højre side kan ses i historikken.

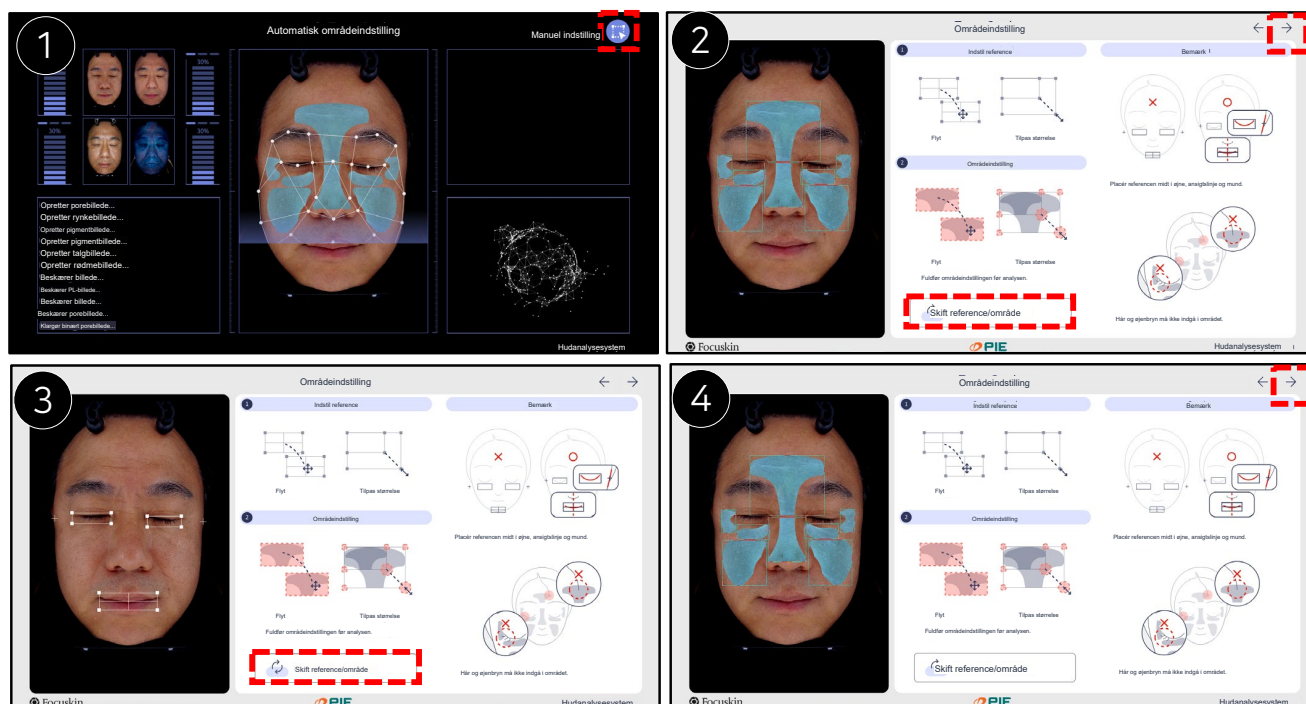


Fotografering: analyseområder

1 · Ved analyse med automatisk områdeindstilling skal du trykke på knappen øverst til højre for at åbne områdevinduet og foretage detaljerede indstillinger.

2 · Områdeindstillingen bygger på referenceindstillingen. Hvis området ikke er korrekt, trykker du på 'Adjust Reference/Area' nederst for at ændre referencen og justere området. Hvis der ikke kræves større ændringer, kontrollerer du blot, at hår, øjenbryn og næsebor ikke indgår, og klikker på 'Next' for at starte analysen.

3 · Referenceindstilling: Hvis analyseområdet ligger væsentligt forkert, skal referencen justeres. Indstil rammen, så den omfatter øjne og mund som vist på billedet. Tryk derefter igen på 'Adjust Reference/Area' for at vende tilbage til områdeindstillingen.

4 · Selv efter referencejusteringen kan hår, øjenbryn og næsebor være med i området. Hvis der er meget lyse partier i området, skal du ændre områdets størrelse eller flytte det. Tryk derefter på 'Next'. Hvis analyseområdet gøres for stort, kan det forringe analysens nøjagtighed.

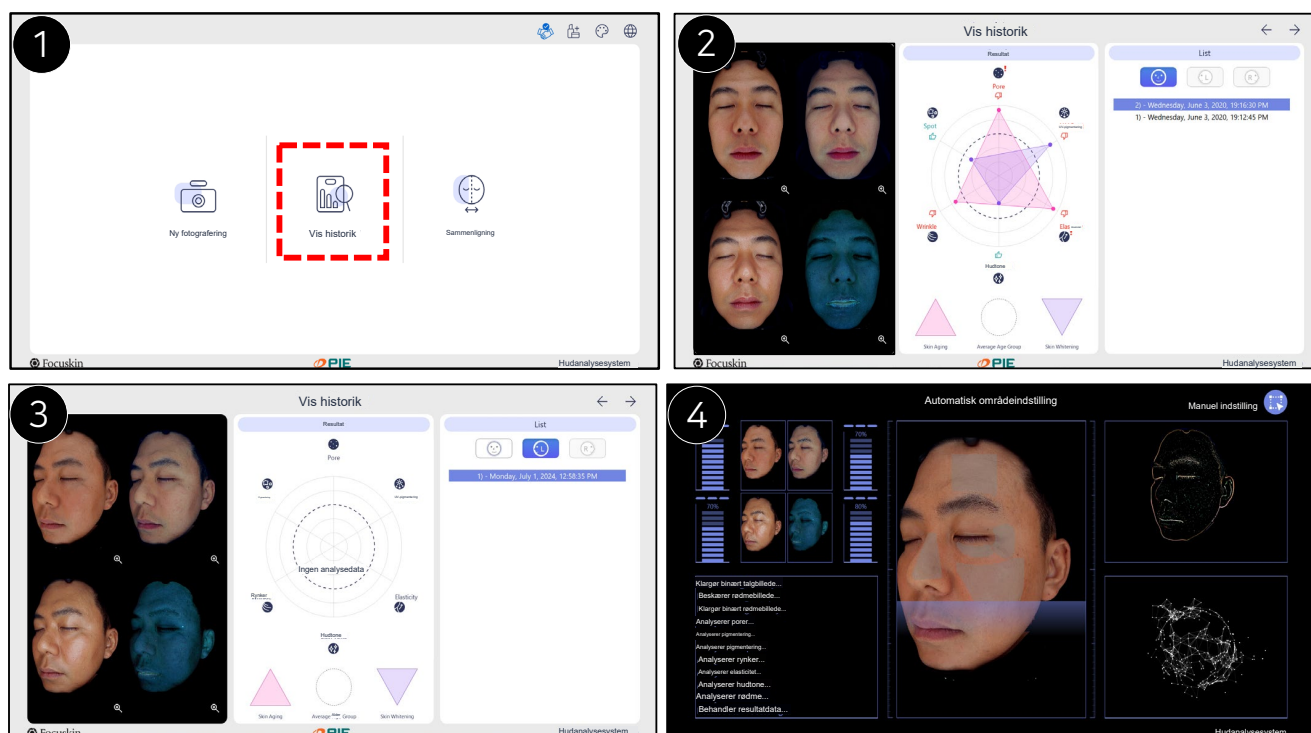


Visning af historik

1 · Klik på 'History' på Focuskins startskærm. Vælg en kunde på listen, og klik på 'View History'.

2 · I historikvinduet vises originalbillederne med de fire lyskilder til venstre. I resultatgrafen er hudaldring markeret med rødt, mens hudens lysningsparametre er markeret med lilla trekanten. Den stiplede linje viser aldersgruppens gennemsnit. Værdier inden for linjen er bedre end gennemsnittet; værdier uden for linjen er dårligere.

3 · Optagelserne står i rækkefølge efter session, dato og tidspunkt. Brug ikonerne øverst til at vælge front, venstre eller højre profil. Tryk på 'Next' ved den valgte optagevinkel for at fortsætte til analysen.

4 · Ved analyse af sidebilleder trykker du på 'Adjust Area' på samme måde som ved frontbilledet. Sørg for, at hår, øjenbryn og næsebor holdes uden for analyseområdet. Tryk derefter på 'Next'.

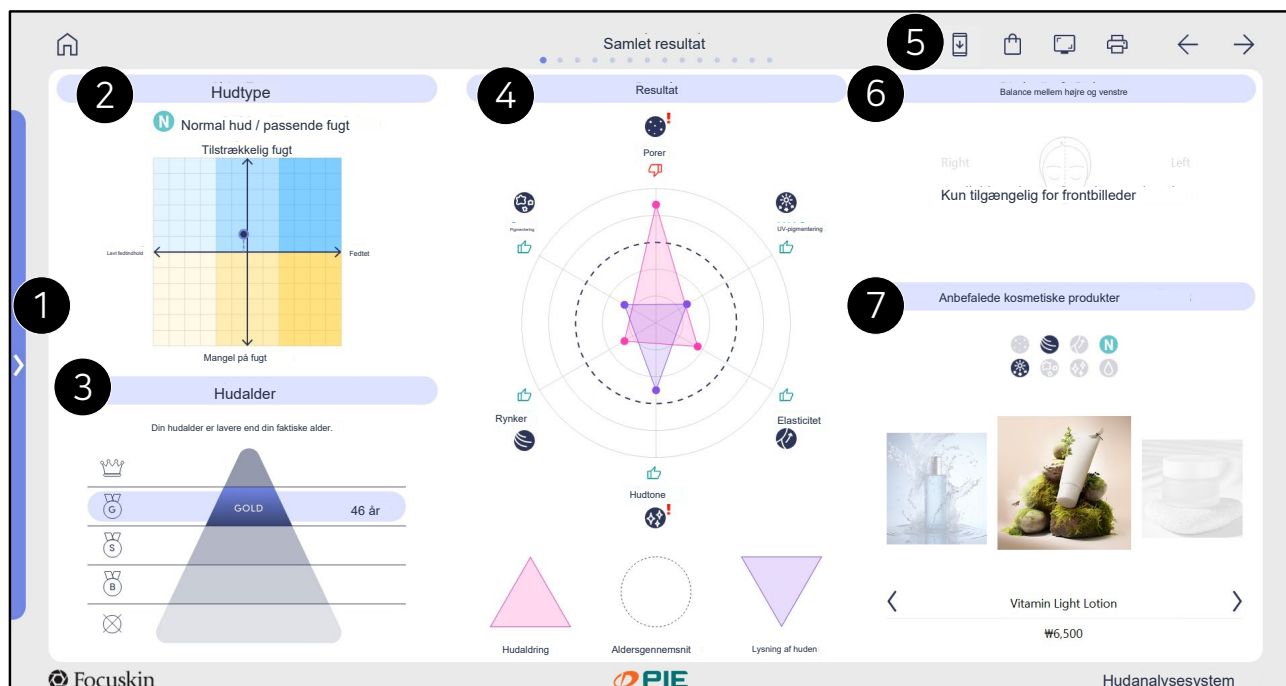

Analyseresultater: samlet oversigt

1 · Vælg det ønskede analysepunkt: hudtype, porer, rynker, elasticitet, pigmentering, UV-pigmentering, hudtone, rødme, glans, talg (porfyrinandel), fugt eller detaljevisning.

2 · Hudtypen vises overskueligt med hensyn til tørhed/fugt. X-aksen viser fedtindhold, og Y-aksen viser fugtniveau.


3 · De samlede hudresultater vises opdelt efter aldersgrupper. Skalaen har fem niveauer, og hudalderen vises til højre.

4 · Hudaldring markeres med lyserøde trekanter, og hudens lysningsparametre markeres med lilla trekanter i en sekskantet graf. Den stiplede linje viser aldersgruppens gennemsnit. Værdier uden for linjen er dårligere end gennemsnittet; værdier inden for linjen er bedre.

5 · Fra venstre mod højre: del, butik, skærmbillede og udskriv. Pilene til højre skifter mellem forrige og næste valgmulighed. Resultater kan deles via mobilapp eller QR-kode. Ved QR-delning bruges kundens fødselsdato automatisk som adgangskode i formatet ÅÅMMDD. Eksempel: 1. januar 1990 giver 900101.


6 · Kontrollér symmetrien ved at sammenligne venstre og højre side. Tryk på 'Symmetrical Skin View' for at se de symmetriske billeder.

7 · Anbefalede produkter vises nederst. De eksisterende produkter er forhåndsregistreret og kan suppleres, ændres eller slettes. Hvis en partnervirksomhed er registreret, anvendes dens registrerede produkter.

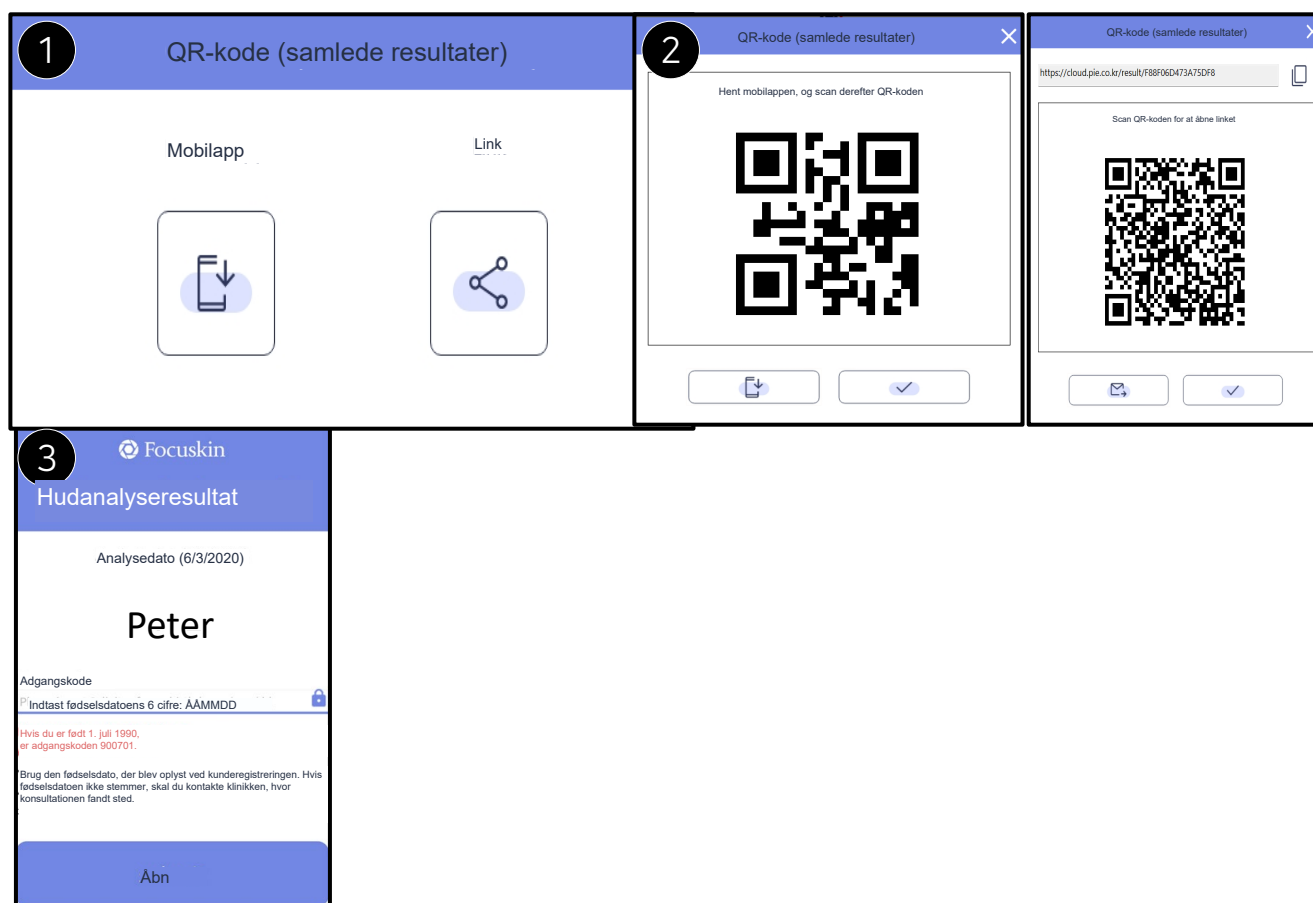


Deling af analyseresultater

- 1 · Vælg den ønskede overførselsmetode: 'Mobile Transfer' via Beauty Place-appen eller 'Link Sharing' via QR-kode.
- 2 · Beauty Place-app / linkdeling: Når du vælger 'Link Sharing', vises et link og en QR-kode. Resultaterne kan åbnes ved at scanne QR-koden eller bruge linkadressen. De kan også sendes via e-mail med e-mailknappen nederst.
- 3 · Ved adgang via QR-koden bruges den fødselsdato, kunden blev registreret med, automatisk som adgangskode. Indtast fødselsdatoen i formatet ÅÅMMDD for at åbne analyseresultaterne, fx 900101 for 1. januar 1990.

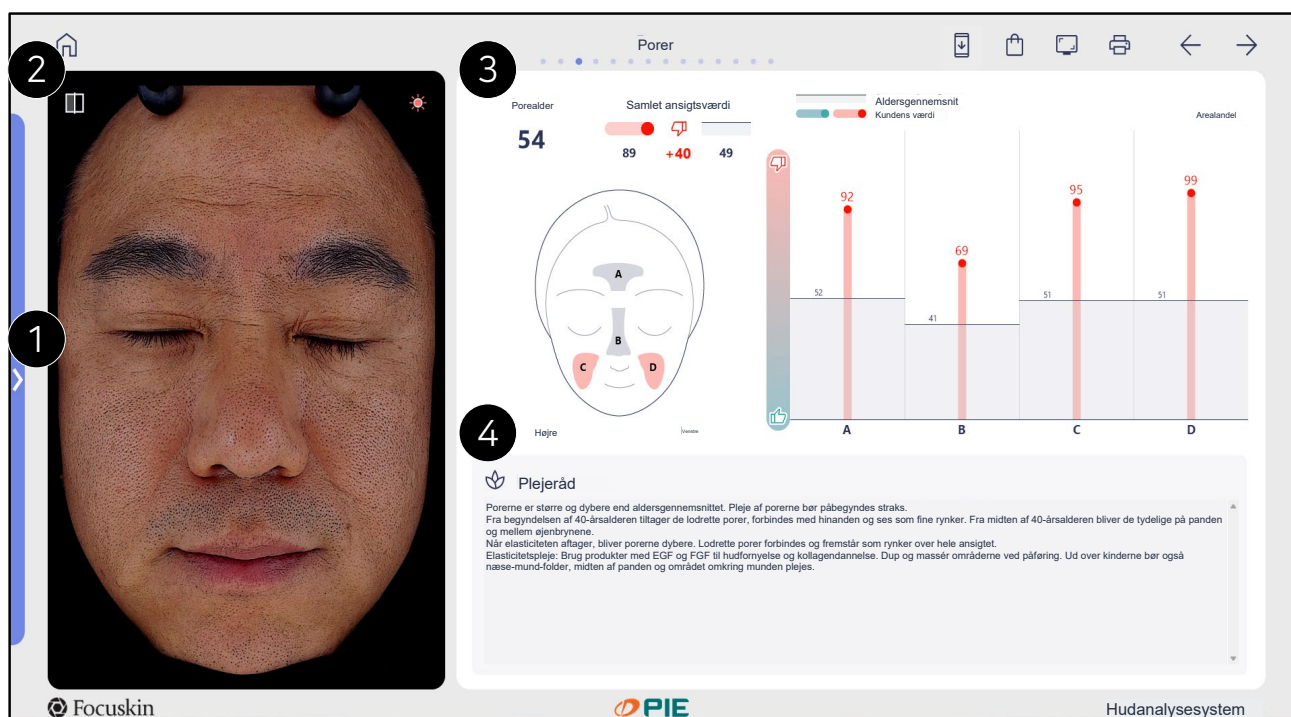

Analyseresultater: detaljevisning

- 1 · Vælg det punkt, du ønsker detaljer om, fx hudtype, porer, rynker, elasticitet, pigmentering, UV-pigmentering, hudtone, rødme, glans, talg (porfyrinandel) eller fugt.
- 2 · Sammenlign det optagne foto med det bearbejdede analysebillede ved hjælp af skydevisning og overlejring.
- 3 · For hvert analysepunkt vises værdier fra de områder, hvor tilstanden typisk forekommer. Kundens samlede gennemsnit og værdierne for de enkelte områder kan sammenlignes med aldersgruppens gennemsnit. Det samlede gennemsnit beregnes som gennemsnittet af områdeværdierne.
- 4 · Der vises korte råd. Hvert analysepunkt har forskellige anbefalinger, som kan bruges aktivt under konsultationen.

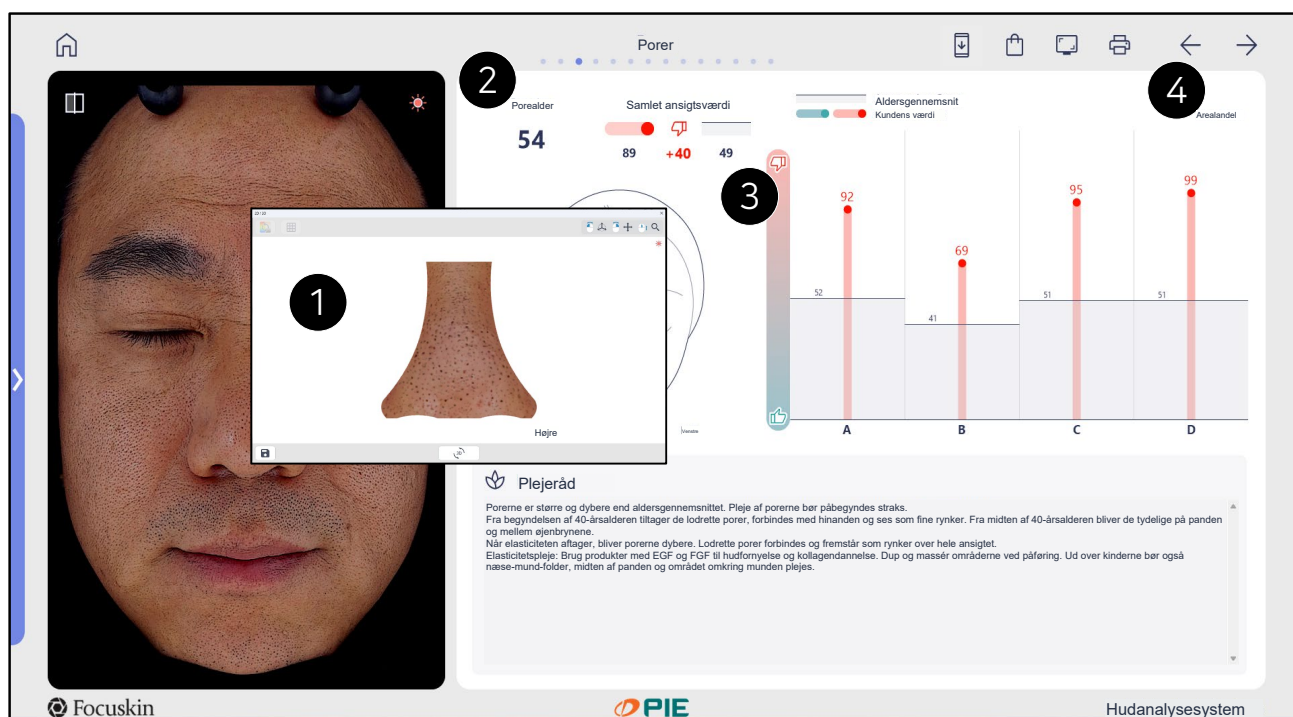


Detaljevisning: værdier og enheder

1 · Forstørret visning: Analyseområderne vælges efter de steder, hvor det enkelte analysepunkt typisk forekommer. Områderne ses i det centrale billede. Klik på et område for at forstørre det.

2 · Samlet gennemsnit: Der skelnes mellem kundens værdier og aldersgruppens gennemsnit. Kundeværdierne stammer fra den udførte analyse, mens aldersgennemsnittet bygger på personer i samme aldersgruppe. Den oprindelige landeindstilling bestemmer, hvilken regions huddata der anvendes.

3 · Områdeværdier: Værdierne vises for de områder, der er markeret i illustrationen. Områder med bedre værdier end aldersgennemsnittet markeres med blå; dårligere værdier markeres med rødt.

4 · Enheder: Porer, rynker, elasticitet, glans, pigmentering og UV-pigmentering angives som procent af analyseområdets areal, hvor hele området svarer til 100 %. Hvis kundens poreværdi for område A (panden) er 56, og aldersgennemsnittet er 41, er porearealet henholdsvis 56 % og 41 %. Forskellen er 15 procentpoint. Hudtone og rødme måles som forskelle i hudens RGB-værdier. Talg angives som antal, og porfyrin angives som en andel.

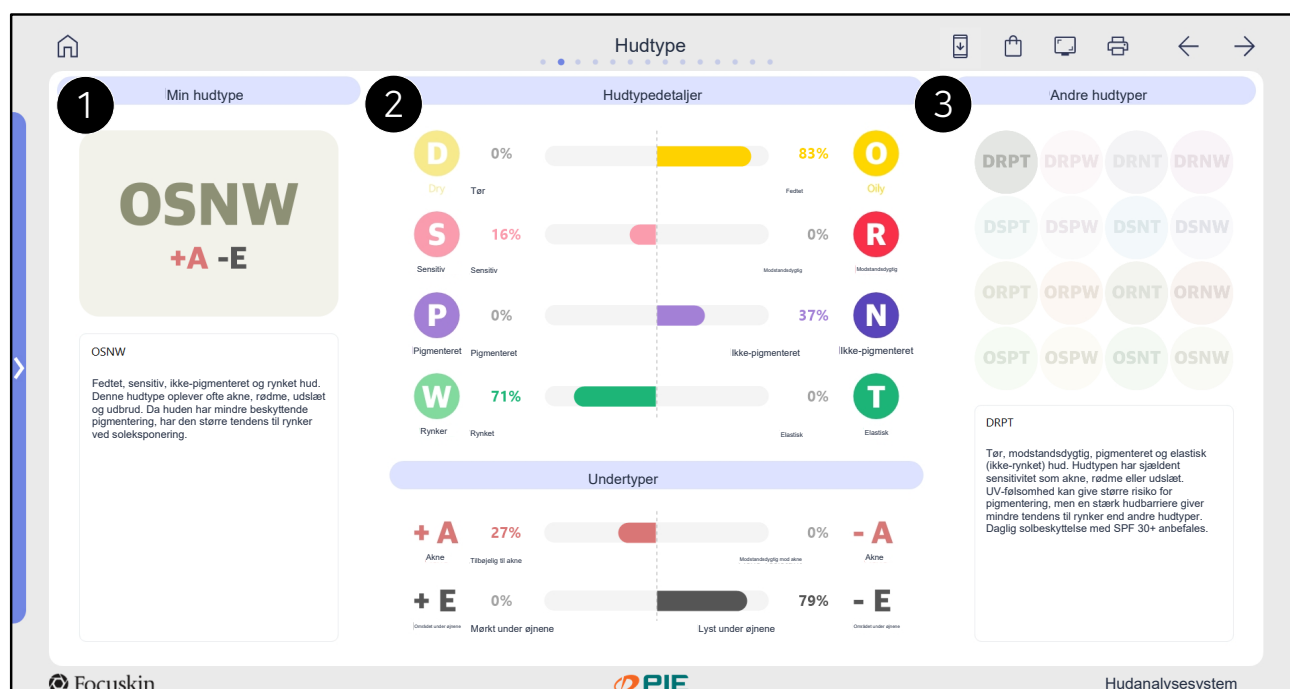


Analyseresultater: hudtype

1 · Min hudtype: På baggrund af analysen bestemmes hudtypen ud fra fire hovedtyper og to undertyper. De 16 hudtyper bygger ikke blot på én eller to hudparametre, men på kombinationer af flere hudfaktorer. På grund af typeinddelingens opbygning kan ujævne værdier medføre en placering i den højere kategori. Kontrollér derfor fordelingen under konsultationen.

2 · Hudtypedetaljer: Analysen vurderer huden inden for seks modsætningspar: tør/fedt, sensitiv/modstandsdygtig, pigmenteret/ikke-pigmenteret, rynket/elastisk, tilbøjelig til urenheder/modstandsdygtig mod urenheder samt mørkt/lyst område under øjnene.

3 · Andre hudtyper: Du kan læse om hudtyper, som er modsatte eller helt forskellige fra kundens. Klik på en anden hudtype; beskrivelsen vises nederst.

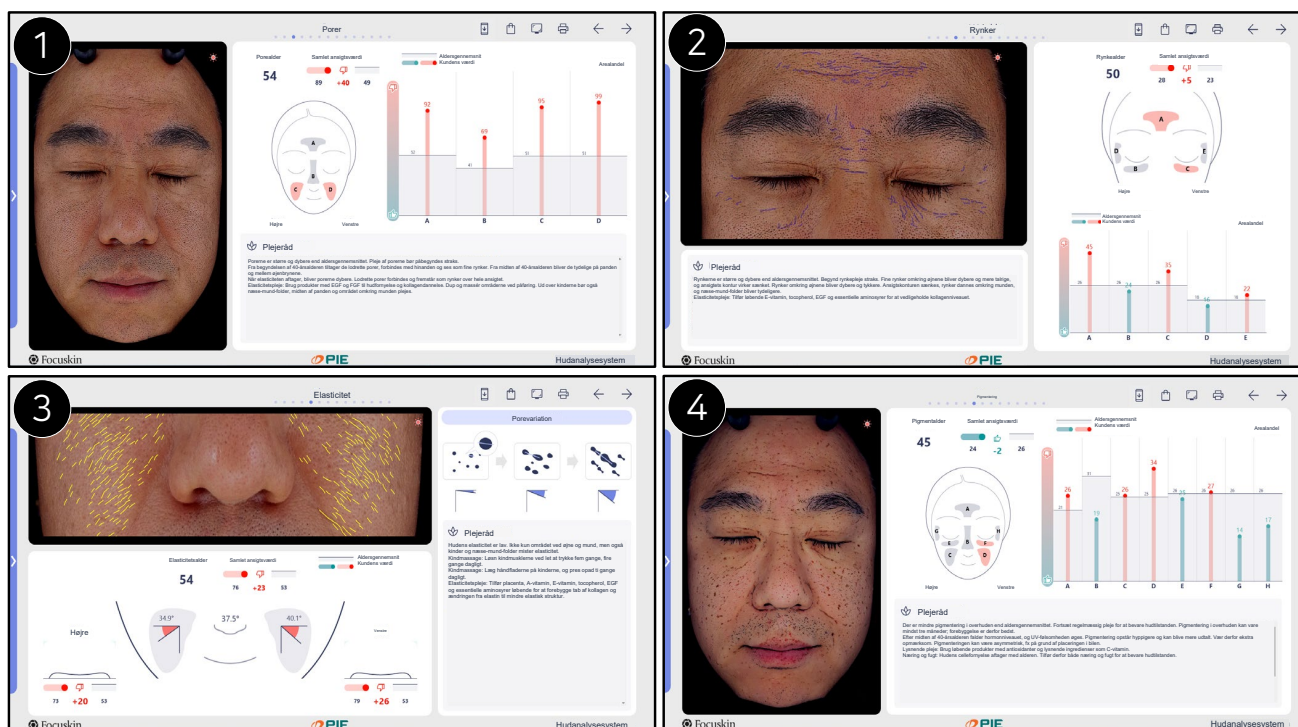


Por, rynker, elasticitet og pigmentering

1 · Porer: Normalt lys anvendes til at analysere fire områder: pande, næse, højre kind og venstre kind. Værdierne viser porernes udbredelse ud fra antal, størrelse og dybde i forhold til områdets areal.

2 · Rynker: Parallelpolariseret lys anvendes på fem områder: panden, ved begge øjenkroge og under begge øjne. Længere og dybere rynker markeres med blå linjer. Sorte linjer angiver højere rynkeværdier med flere sammenhængende forløb, mens prikker og korte linjer angiver lavere værdier.

3 · Elasticitet: Med normalt lys registreres områder, hvor porerne ændrer sig fra runde til linjeformede som følge af nedsat elasticitet. Antallet, længden og vinklen af de gule linjer bruges til vurderingen. Flere og længere gule linjer angiver lavere elasticitet; færre og kortere linjer angiver højere elasticitet.

4 · Pigmentering: Krydspolariseret lys viser pigmenteringsværdier i alle områder. Antallet, intensiteten og størrelsen af pigmentpletter bestemmer værdien. Højere værdier betyder flere og mørkere pigmentpletter; lavere værdier betyder færre og lysere pletter.

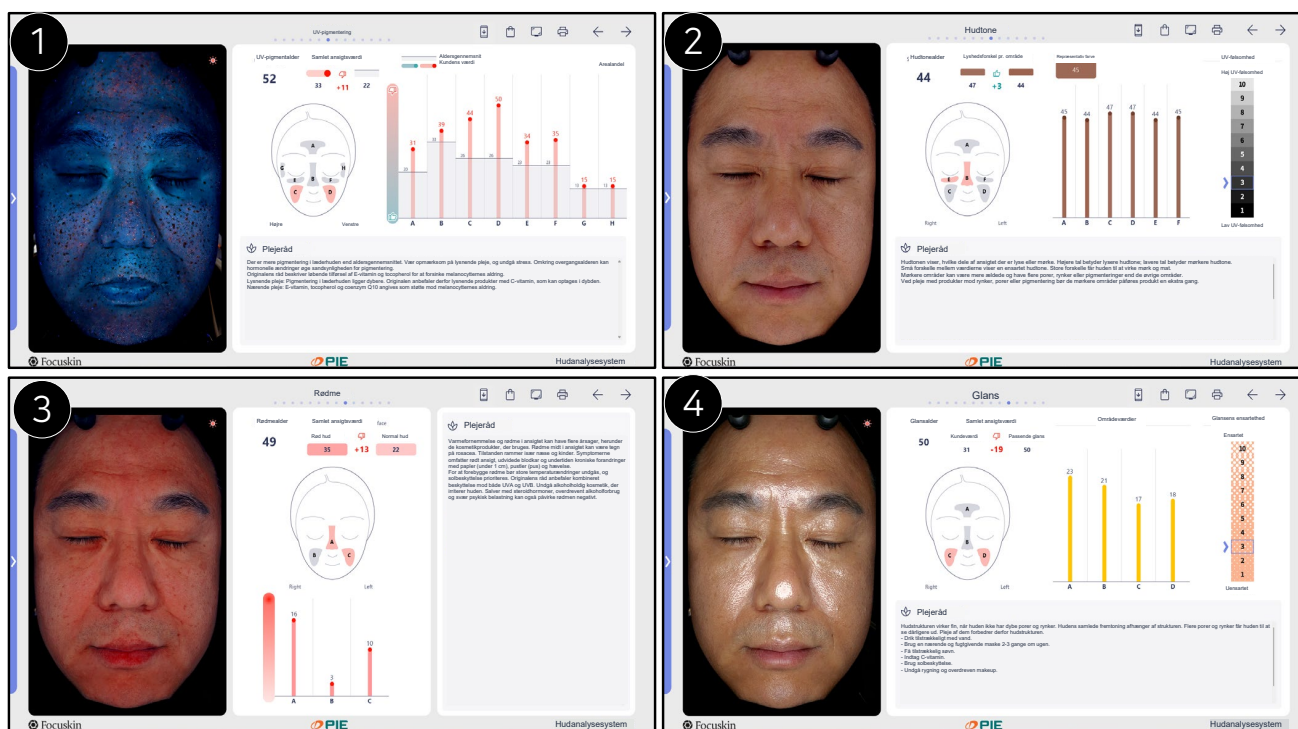


UV-pigmentering, hudtone, rødme og glans

1 · UV-pigmentering: UV-lys viser niveauet af pigmentaflejring inde i huden på tværs af analyseområderne. Flere, mørkere og mere udbredte pigmenteringer giver højere værdier; mindre udbredelse giver lavere værdier.

2 · Hudtone: Normalt lys bruges til at vise hudtonen i alle områder. Hudtonen angives ved forskelsværdien for hvert område. Værdier under 10 regnes i programmet for at være inden for normalområdet, mens værdier over 10 regnes for at ligge udenfor. UV-følsomheden nederst vises på en skala fra 1 til 10 baseret på hudens lyshed og farve. Jo tættere værdien er på 1, desto mindre UV-følsom og mere tilbøjelig til at blive brun vurderes huden. Jo tættere værdien er på 10, desto mere UV-følsom og tilbøjelig til rødme vurderes huden.

3 · Rødme: Krydspolariseret lys bruges på fire områder: pande, næse, højre kind og venstre kind. En forskelsværdi mellem normal hud og rød hud på under 10 ligger inden for programmets normalområde. En værdi på 10 eller derover ligger udenfor.

4 · Glans: Glans beskriver typisk en glat og strålende hudoverflade med naturlige hudolier. Aktive talgkirtler giver huden en naturlig glans. Tilstrækkelig fugt og passende fugtighedspleje bidrager til at bevare tilstanden ved at fastholde fugten. Effektiv optagelse af hudplejeingredienser giver en glat hudstruktur med glød og danner grundlag for en sund og robust hud med glans.

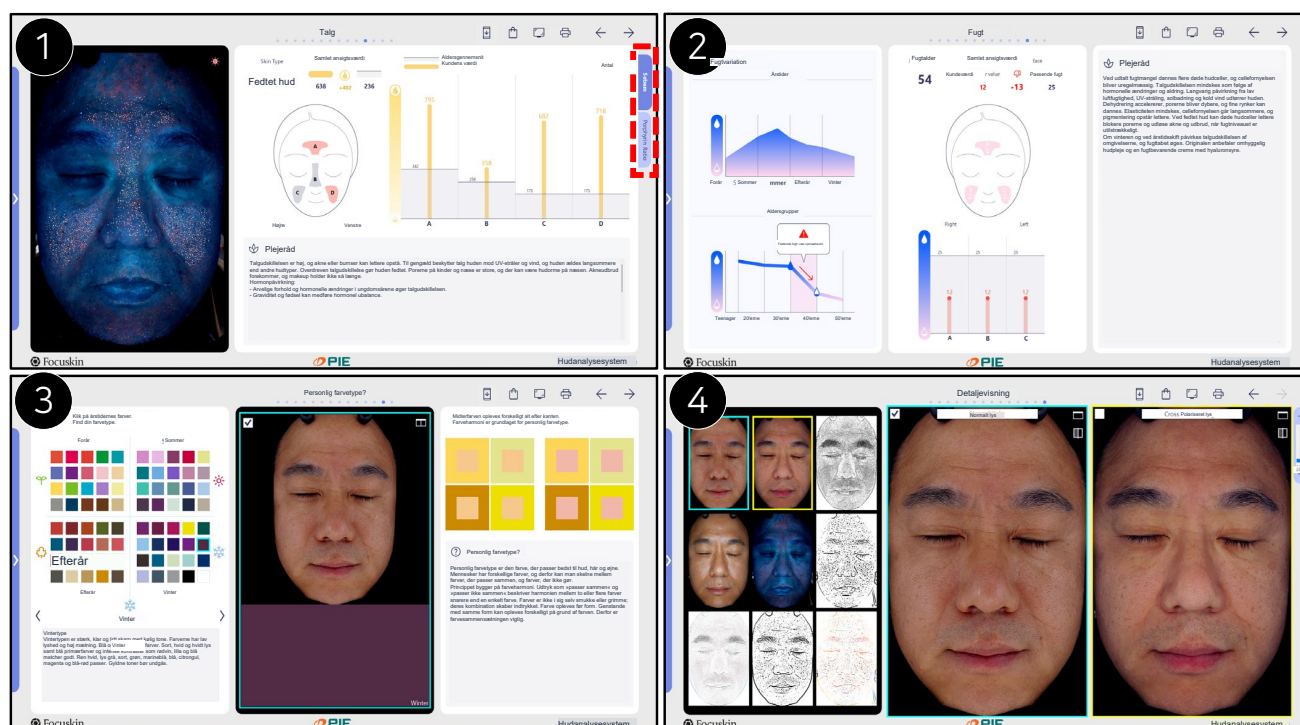


Talg, porfyrin, fugt og personlig farvetype

1 · Talg: UV-lys anvendes til at tælle talgforekomster på pande, næse, højre kind og venstre kind. I modsætning til analysepunkter, der angives som en arealandel, angives talg som antal. Porfyrinandel: UV-lys anvendes i de samme fire områder. Porfyrin er et biprodukt fra aknebakteriers stofskifte og udsender rød fluorescens i UV-lys. Andelen angiver porfyrinholdige talgforekomster i forhold til det samlede antal. En højere andel angiver ifølge manualen større sandsynlighed for aknedannelse. Andelen er kun meningsfuld, når det samlede antal talgforekomster er relativt højt.

2 · Fugt: Viser målingerne fra pande, højre kind og venstre kind. Vurderingen bygger ikke på aldersgennemsnit, men på en absolut grænse på 25 %. Over 25 % ligger inden for programmets normalområde; under 25 % ligger udenfor.

3 · Personlig farvetype: Her kan du udforske og vælge en personlig farvetype efter årstiderne. Valget er ikke et analysepunkt, men foretages frit og kan ændres efter ønske.

4 · Detaljering: Sammenlign billeder ved at forstørre, beskære, overlejre eller udskifte dem. Vælg til højre billedet for det område, du vil ændre, og vælg derefter til venstre det billede, der skal erstatte det.

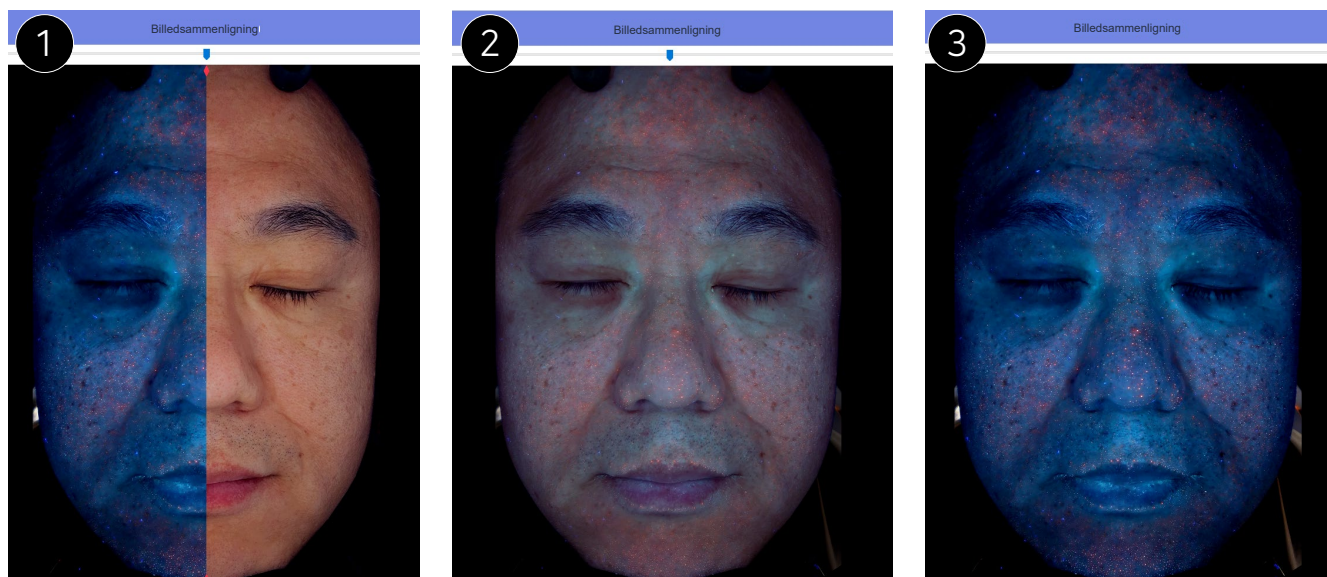


Skydevisning, overlejring og billedskift

1 · Skydevisning (Curtain): I detaljevisningen kan to billeder lægges oven på hinanden med det første som reference. Brug skyderen nederst til at trække en skillelinje hen over billederne, så det ene eller det andet afsløres. Rul med musen for at zoome ind eller ud.


2 · Overlejring (Overlay): Læg to billeder oven på hinanden med det første som reference. Brug skyderen til at justere det overlejrede billedes gennemsigtighed. Rul med musen for at zoome ind eller ud.

3 · Billedskift (Replace): Læg to billeder oven på hinanden med det første som reference. Brug udskiftningsknappen nederst til at skifte mellem billederne og sammenligne dem. Rul med musen for at zoome ind eller ud.

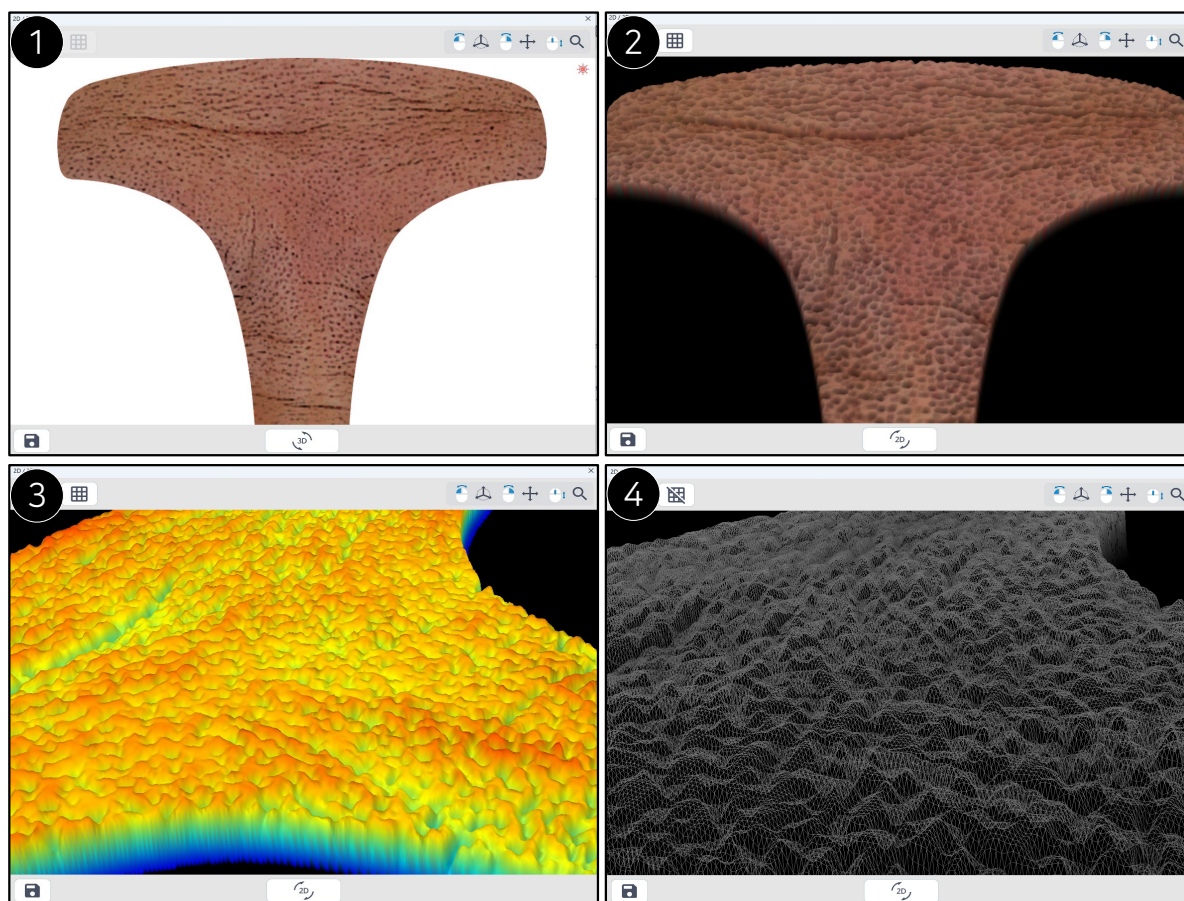

3D-visning af analyseområder


- 1 · For hvert analysepunkt udpeges de områder, hvor problemer typisk forekommer. Analyseområderne er forskellige. Klik på et områdes billede for at forstørre det og se det nærmere.
- 2 · Tryk på 3D-knappen nederst for at vise området i 3D. Brug musen til at undersøge området: venstre museknap til 3D-visning, højre museknap til 2D-visning og musehjulet til at zoome ind og ud.
- 3 · Tryk på farveskiftknappen øverst til venstre for at vise farvekonturer baseret på dybden. Den anden knap, gitterknappen, giver mulighed for en mere detaljeret vurdering af dybde og tilstand.
- 4 · Skift farver og position for at undersøge området fra forskellige visninger. Tryk på gemmeknappen nederst til venstre for at gemme billedet.

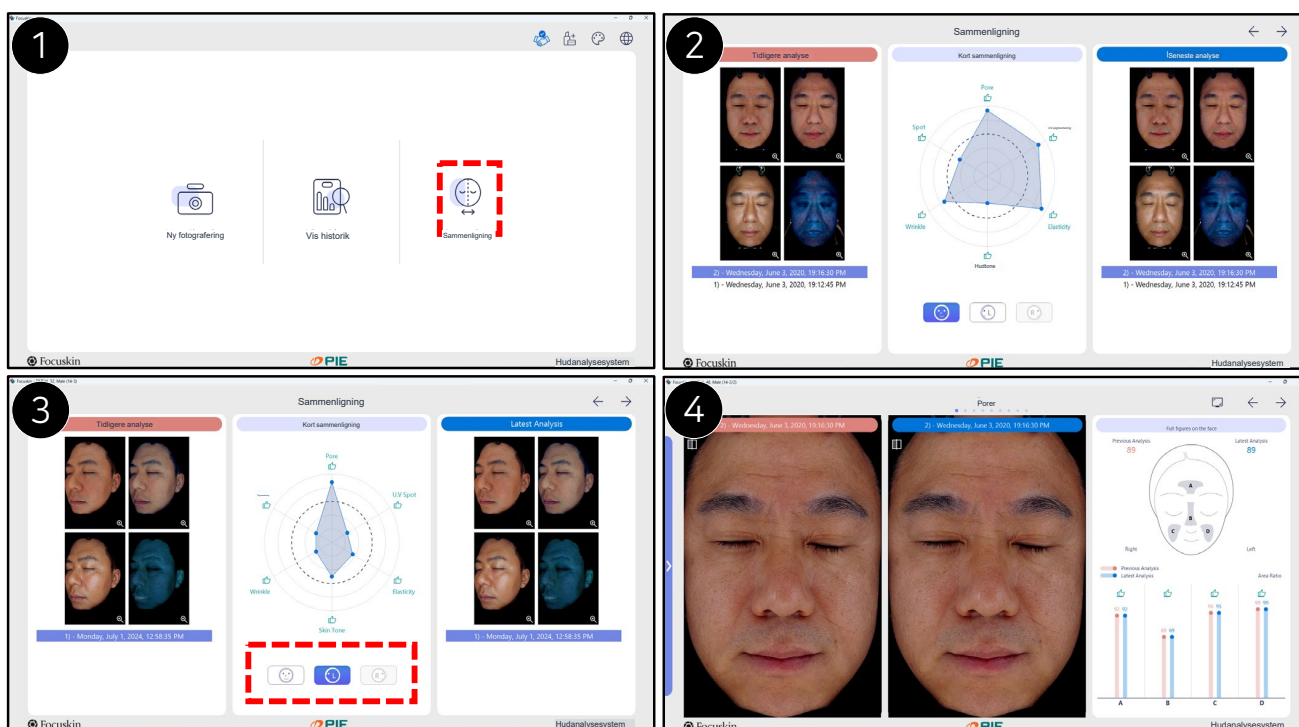

Sammenlignende analyse


- 1 · Vælg 'comparison analysis' i højre side af startskærmen. Den valgte kunde skal have mindst to sessioner.
- 2 · Fra venstre mod højre vises tidligere analysedato, kort sammenligning og seneste analysedato. Datoerne for begge analyser kan frit vælges nederst.
- 3 · Brug ikonet nederst i vinduet med den korte sammenligning til at vælge front-, venstre- eller højrebillede. Analysen udføres for den valgte optagevinkel.
- 4 · Resultatvinduet viser den tidligere og derefter den seneste analysedato. Klik på ikonet øverst til venstre i fotoet for at sammenligne med skydevisning, overlejring eller billedskift. Grafen til højre viser de numeriske forskelle mellem områderne på de to analysedatoer.

Deling af datamapper

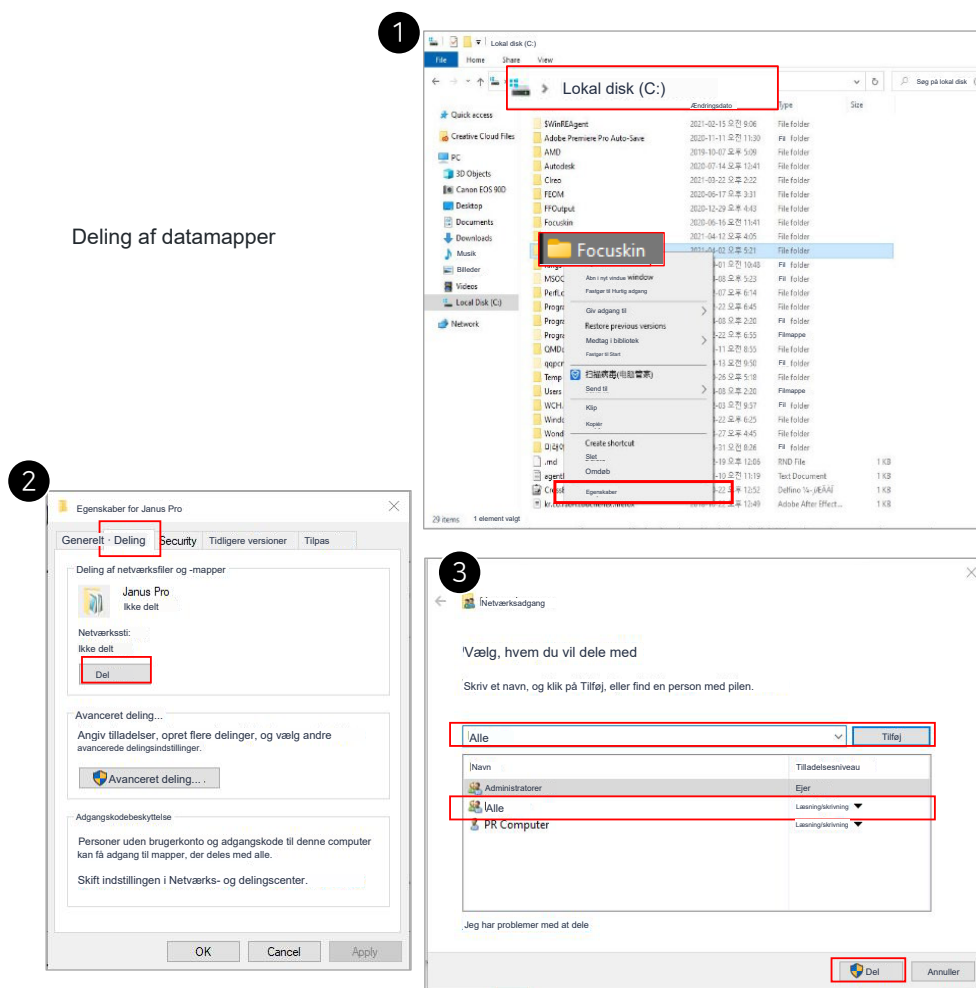



Konsultations-pc: del datamappen

- 1 · Højreklik på mappen 'Janus Pro' under Denne pc > C-drevet, og vælg 'Properties' (Egenskaber).
- 2 · Klik på 'Share (S)...' (Del) under deling.
- 3 · Tilføj 'Everyone' (Alle), ændr tilladelsesniveauet til læsning/skrivning, og klik på 'Share' (Del).

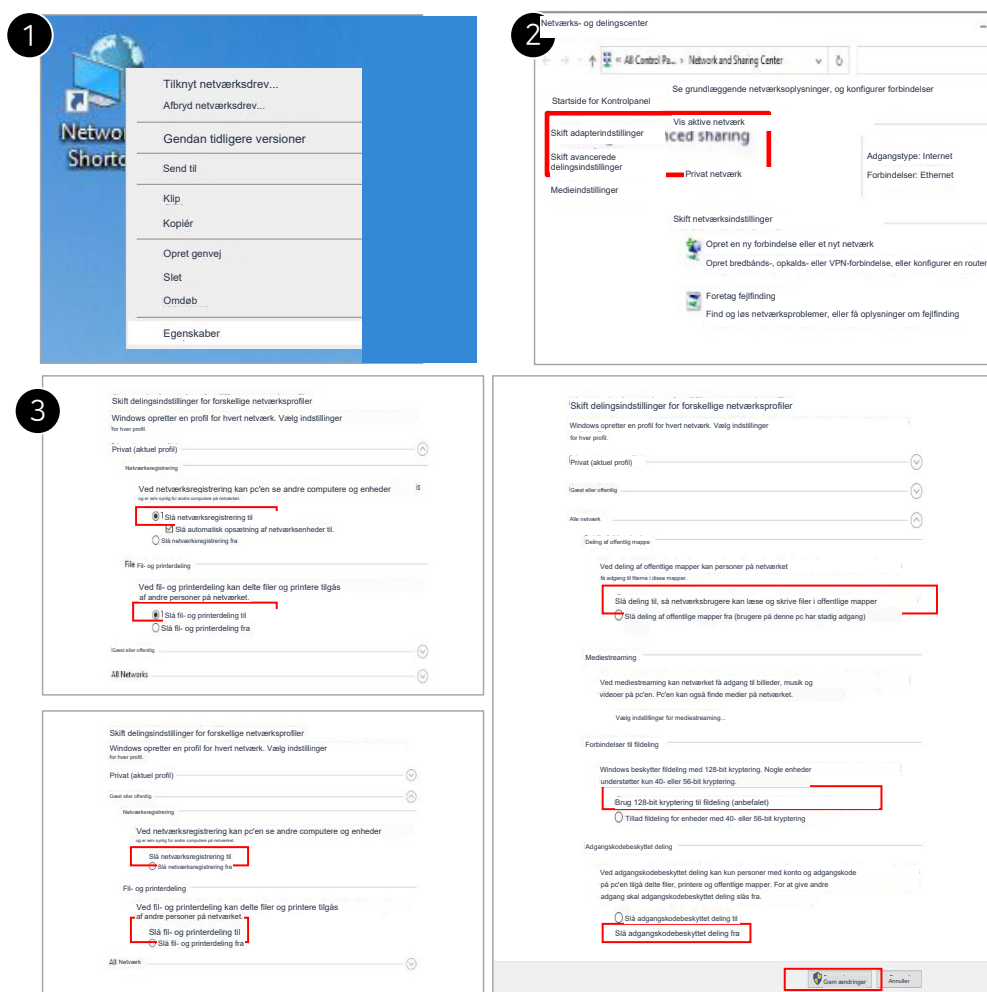

Konsultations-pc: netværksdeling


- 1 · Højreklik på Netværk, og vælg 'Properties' (Egenskaber).
- 2 · Klik på 'Change Advanced Sharing Settings' (Skift avancerede delingsindstillinger).
- 3 · Markér indstillingerne som vist på skærmbilledet, og klik på 'Save Changes' (Gem ændringer).

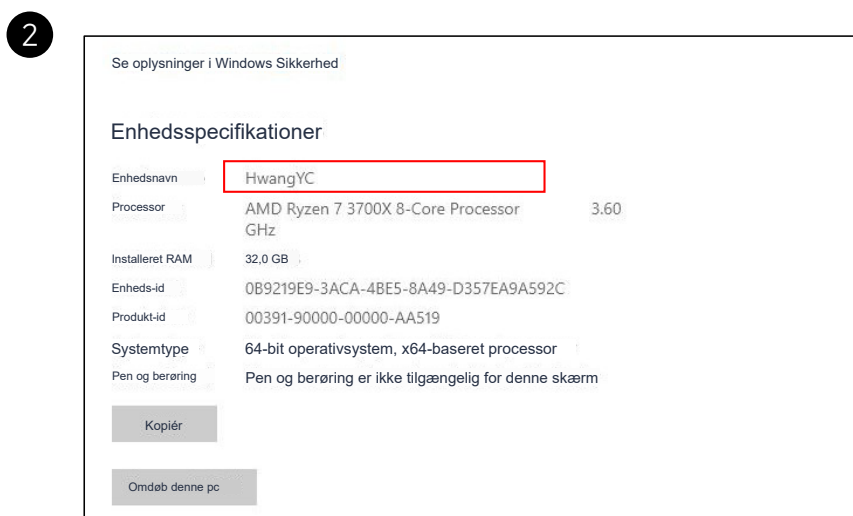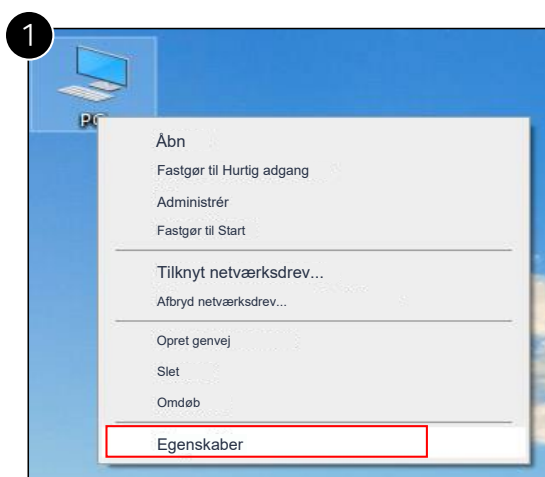

Konsultations-pc: find computernavnet

1 · Åbn computerens egenskaber for at finde dens navn.


2 · Notér navnet på optage-pc'en. Det skal bruges, når konsultations-pc'en skal have adgang til den.

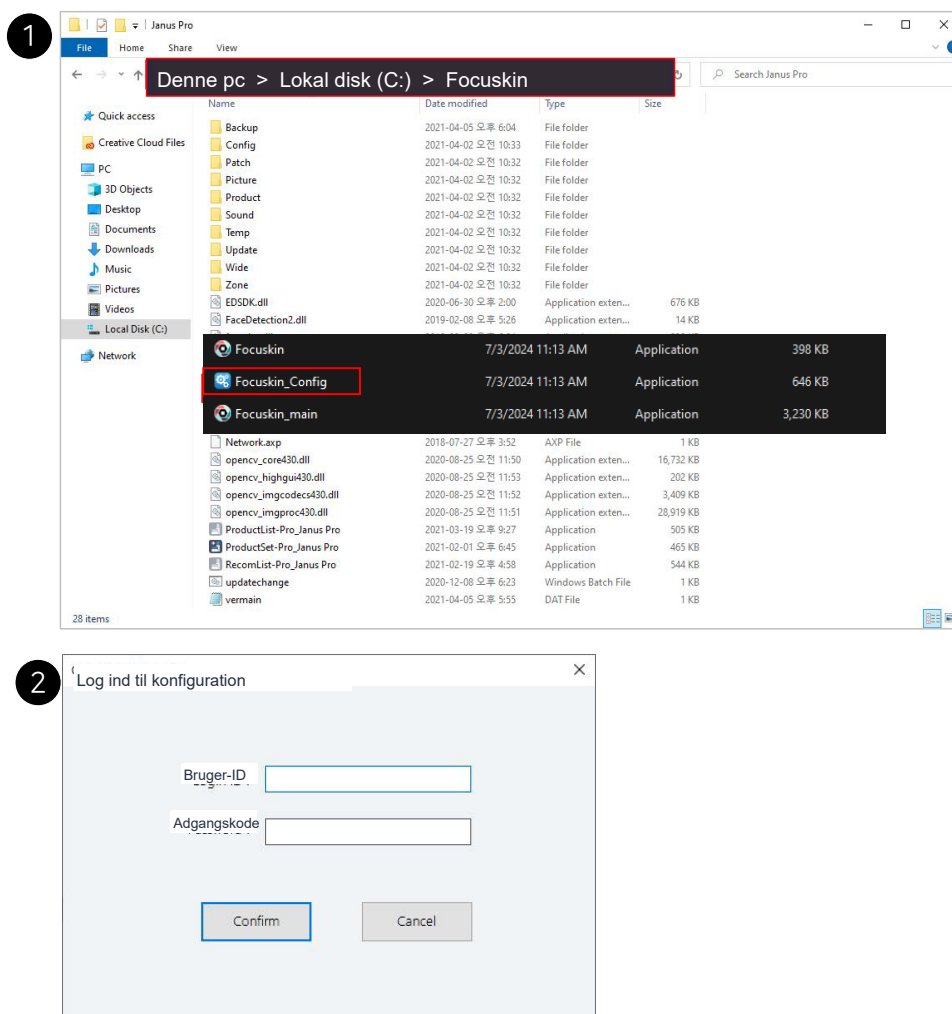

Konsultations-pc: åbn konfigurationen


1 · På konsultations-pc'en, hvor programmet er installeret, åbner du programmets mappe og klikker på filen 'Focuskin_Config'.

2 · Tænd den pc, der skal bruges til konsultation. Gå til C:\Focuskin, og åbn 'Focuskin_Config'. Log ind med bruger-ID 'Focuskin' og adgangskoden 'piepro' for at åbne indstillingsvinduet.

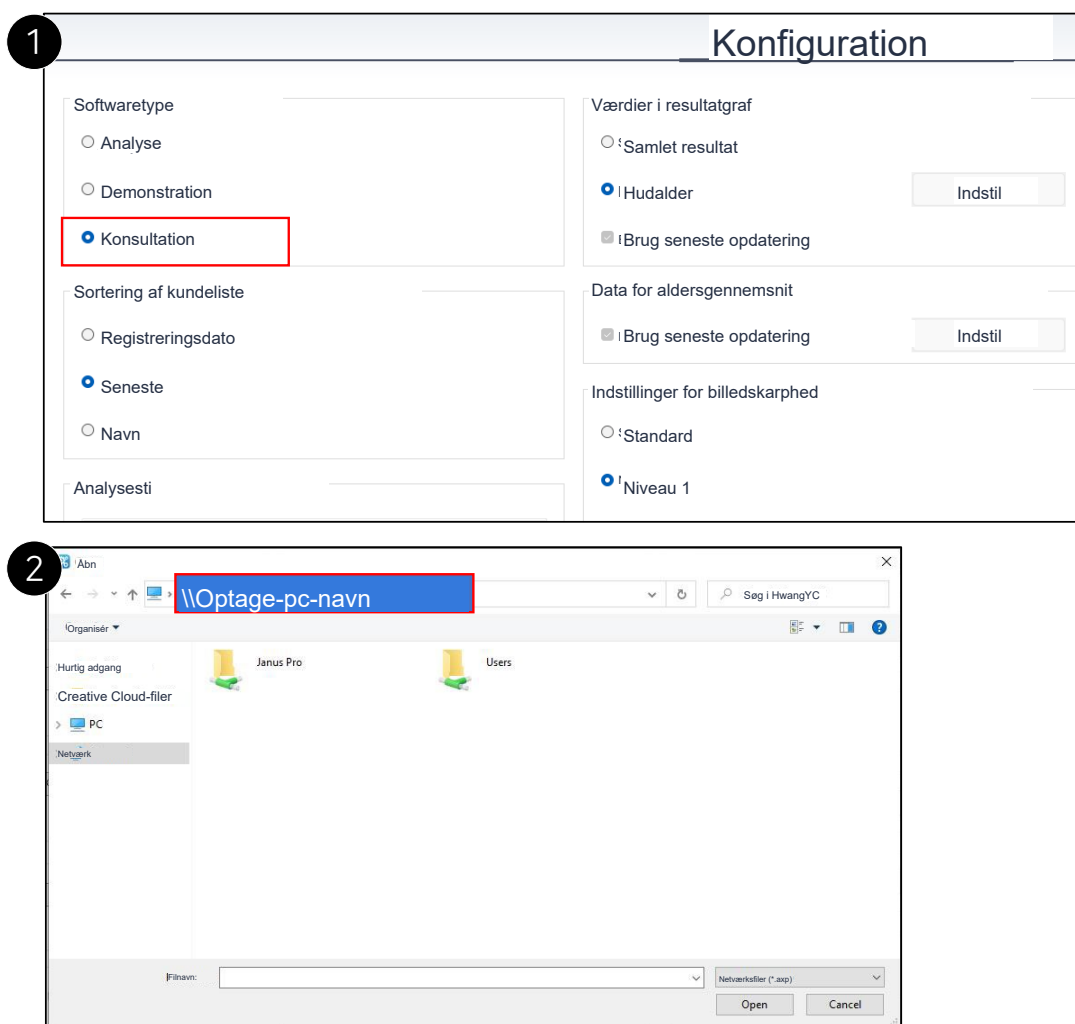

Konsultations-pc: forbindelse til optage-pc

- 1 · Vælg softwaretypen 'Consultation' øverst til venstre.
- 2 · Indstil stien, som konsultations-pc'en bruger til at få adgang til optage-pc'en via netværket. Skriv optage-pc'ens navn i søge-/adressefeltet, fx \\Optage-pc-navn.

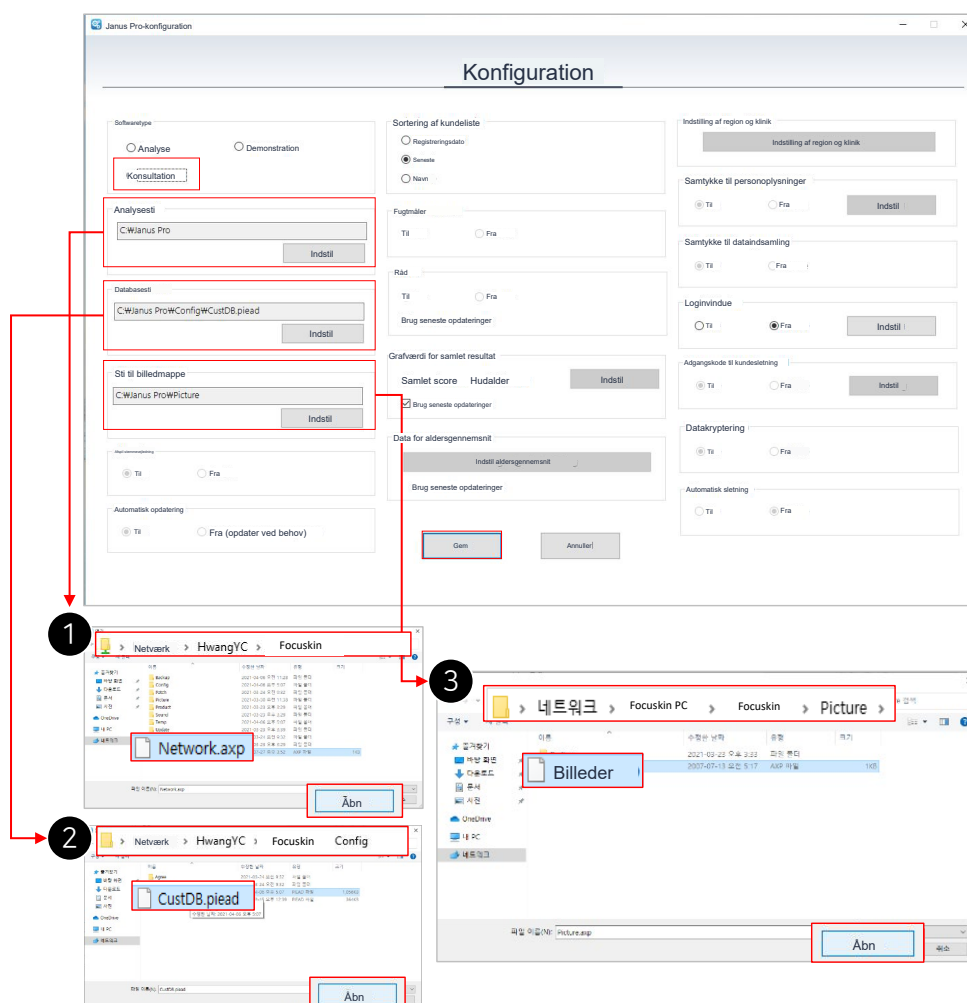

Konsultations-pc: indstil stier

- 1 · Klik på 'Set Analyzer Path'. Åbn den relevante fil i Focuskin-mappen, som deles fra analysatorens pc.
- 2 · Klik på 'Set Database Path'. Åbn den relevante fil i mappen 'Config'.
- 3 · Klik på 'Set Image Folder Path'. Åbn den relevante fil i mappen 'Picture', og klik på 'Save' (Gem).

The screenshot shows the 'Konfiguration' (Configuration) window of the Focuskin software. It contains various settings organized into sections. Numbered callouts highlight specific areas:

- 1** Softwaretype: Radio buttons for 'Analyse' (selected) and 'Demonstration'.
- 2** Analysesti: Text field containing 'C:\Focuskin' with an 'Indstil' button.
- 3** Beskyttelse ved genanalyse: Radio buttons for 'Til' (selected) and 'Fra'.
- 4** Sortering af kundeliste: Radio buttons for 'Registreringsdato' (selected) and 'Navn'.
- 5** Sti til billedmappe: Text field containing 'C:\Focuskin\Image' with an 'Indstil' button.
- 6** Indstilling af region og klinik: Text field for 'Indstilling af region og klinik'.

Other visible settings include: Databasessti, Sti til billedmappe, Gem originalbillede, Automatisk opdatering, Fugtmåler, Råd, Hudalder, Data for aldersgennemsnit, Indstil følsomhed, Skriftstørrelse i plejeråd, Samtykke til personoplysninger, Samtykke til dataindsamling, Loginvindue, Adgangskode til kundesletning, Datakryptering, Automatisk sletning, and Fjern baggrund fra fotos. At the bottom are 'Gem' and 'Annuller' buttons.

Systemindstillinger

1 · Vælg den relevante softwaretilstand: Analyser Mode (analyse): Bruges, når Focuskin er tilsluttet en pc, der skal udføre analyser. Demo Operation (demonstration): Bruges til at demonstrere programmet uden en tilsluttet analysator. Consultation Mode (konsultation): Bruges ved opsætning af en konsultations-pc. Begge pc'er skal være på samme netværk, så oplysningerne fra den tilsluttede enhed kan tilgås. Vælg tilstand efter anvendelsen.

2 · En konsultations-pc kan indstilles til at få adgang til data på optage-pc'en, der er forbundet med Focuskin. Begge pc'er skal være på samme netværk.

3 · Funktionen til beskyttelse ved genbesøg ændrer visningen af analyseresultater inden for det indstillede datointerval. Måleværdier, der er dårligere end ved den tidligere analyse, justeres til de tidligere værdier, mens forbedrede værdier vises uændret. Dermed vises resultaterne ikke som dårligere end tidligere inden for perioden.

The screenshot shows the 'Konfiguration' window with the following settings and callouts:

- 1** Softwaretype: ☒ Analyse, ☐ Demonstration
- 2** Analysesti: C:\Focuskin\
- 3** Beskyttelse ved genanalyse: ☐ Til, ☒ Fra
- 4** Sortering af kundeliste: ☐ Registreringsdato, ☒ Seneste, ☐ Navn
- 5** Sti til billedmappe: C:\Focuskin\Image
- 6** Indstilling af region og klinik: Indstilling af region og klinik

Other visible settings include:

- Databasesti: C:\Focuskin\Config\CustDB.piead
- Råd: ☒ Til, ☐ Fra, Brug seneste opdateringer (checked)
- Hudalder: Indstil hudalder, Brug seneste opdateringer (checked)
- Data for aldersgennemsnit: Indstil aldersgennemsnit, Brug seneste opdateringer (checked)
- Indstil følsomhed: Indstil følsomhedsværdi
- Skriftstørrelse i plejeråd: 23
- Samtykke til personoplysninger: ☒ Til, ☐ Fra
- Samtykke til dataindsamling: ☒ Til, ☐ Fra
- Loginvindue: ☐ Til, ☒ Fra
- Adgangskode til kundesletning: ☒ Til, ☐ Fra
- Datakryptering: ☒ Til, ☐ Fra
- Automatisk sletning: ☐ Til, ☒ Fra
- Fjern baggrund fra fotos: ☒ Til, ☐ Fra

Buttons at the bottom: Gem, Annuller.

Systemindstillinger - fortsat

4 · Du kan indstille kundelistens sorteringsrækkefølge, aktivere eller deaktivere fugtmåleren samt vise eller skjule råd. Derved tilpasses både visningen og de funktioner, der anvendes under konsultationer.

5 · I indstillingerne for hudalder kan du angive forskellene mellem aldersintervaller og ændre gennemsnitsdata for forskellige aldersgrupper. Følsomhedsindstillingerne kan øge eller mindske dataværdier med en bestemt procentdel.

6 · Du kan ændre region og klinik/butik, som oprindeligt blev valgt under installationen. Derudover kan du indstille samtykke til afgivelse og indsamling af personoplysninger, konfigurere en loginskærm, indstille adgangskoden til sletning af kunder, aktivere datakryptering og konfigurere automatisk sletning.



Focuskin

Tak!

Focuskin

mesoskinline®

Dansk brugervejledning · mesoskinline